


R 303

Rührwellenschutz
Stirring shaft protection
Protection d'arbre

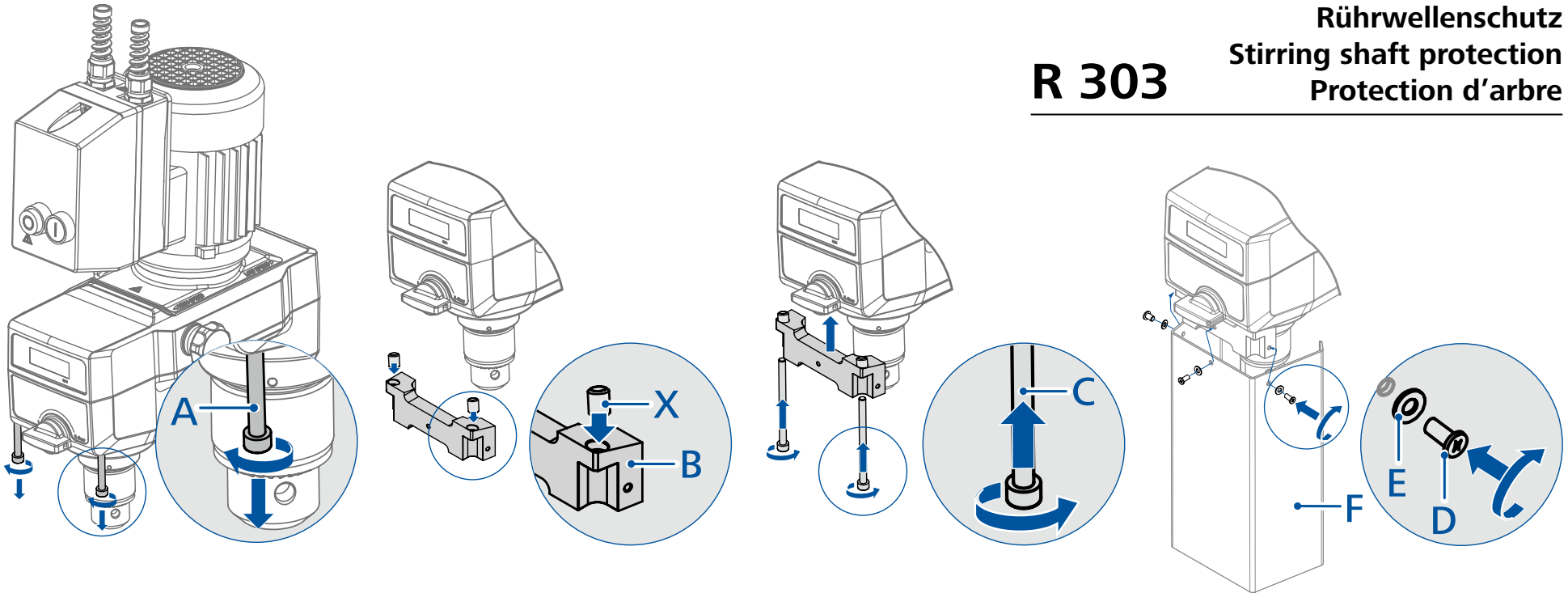

Die Montage des Rührwellenschutzes **R 303** darf nur bei ausgeschaltetem Gerät und bei gezogenem Netzstecker durchgeführt werden.

Entfernen Sie die zwei Schrauben **(A)** [90 mm lang]. Montieren Sie die Halterung **(B)** und zwei Buchsen **(X)** mit den zwei Schrauben **(C)** [100 mm lang]. Befestigen Sie die Abdeckung **(F)** mit den drei Schrauben **(D)** und den drei Scheiben **(E)** an der Halterung. Der Rührwellenschutz **R 303** ist montiert.



The assembly of the **R 303** stirring shaft protection must be accomplished only with switched off equipment and with pulled power supply plug.

Remove the two screws **(A)** [90 mm long]. Install the mounting plate **(B)** and two bushing **(X)** with the two screws **(C)** [100 mm long]. Fasten the cover **(F)** with the three screws **(D)** and the three disks **(E)** to the mounting plate. The **R 303** stirring shaft protection is installed.



L'assemblage du **R 303** protection d'arbre ne peut être mis en oeuvre que pour l'appareil mis hors circuit et avec la fiche secteur tirée.

Éliminez les deux vis **(A)** [90 mm de long]. Installez l'appui **(B)** et deux buissons **(X)** avec les deux vis **(C)** [100 mm de long]. Attachez la couverture **(F)** avec les trois vis **(D)** et les trois disque **(E)** à l'appui. Le protection d'arbre **R 303** est installé.



designed for scientists

IKA-Werke GmbH & Co. KG

Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Germany

Phone: +49 7633 831-0, Fax: +49 7633 831-98

eMail: sales@ika.de

USA

IKA Works, Inc.

Phone: +1 910 452-7059

eMail: usa@ika.net

KOREA

IKA Korea Ltd.

Phone: +82 2 2136 6800

eMail: sales-lab@ika.kr

BRAZIL

IKA Brazil

Phone: +55 19 3772 9600

eMail: sales@ika.net.br

MALAYSIA

IKA Works (Asia) Sdn Bhd

Phone: +60 3 6099-5666

eMail: sales.lab@ika.my

CHINA

IKA Works Guangzhou

Phone: +86 20 8222 6771

eMail: info@ika.cn

POLAND

IKA Poland Sp. z o.o.

Phone: +48 22 201 99 79

eMail: sales.poland@ika.com

JAPAN

IKA Japan K.K.

Phone: +81 6 6730 6781

eMail: info_japan@ika.ne.jp

INDIA

IKA India Private Limited

Phone: +91 80 26253 900

eMail: info@ika.in

UNITED KINGDOM

IKA England LTD.

Phone: +44 1865 986 162

eMail: sales.english@ika.com

VIETNAM

IKA Vietnam Company Limited

Phone: +84 28 38202142

eMail: sales.lab-vietnam@ika.com

Discover and order the fascinating products of IKA online:

www.ika.com



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide

Technical specifications may be changed without prior notice.

20000004984_30000258a_R 303_062020