

シグニア補聴器

障害者総合支援法対応


補聴器カタログ 2025年7月版




障害者総合支援法による
補聴器の交付手続きについて

基本的な補聴器支給制度の流れであり、各市区町村により異なる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認ください。

1 身体障害者手帳の交付手続き

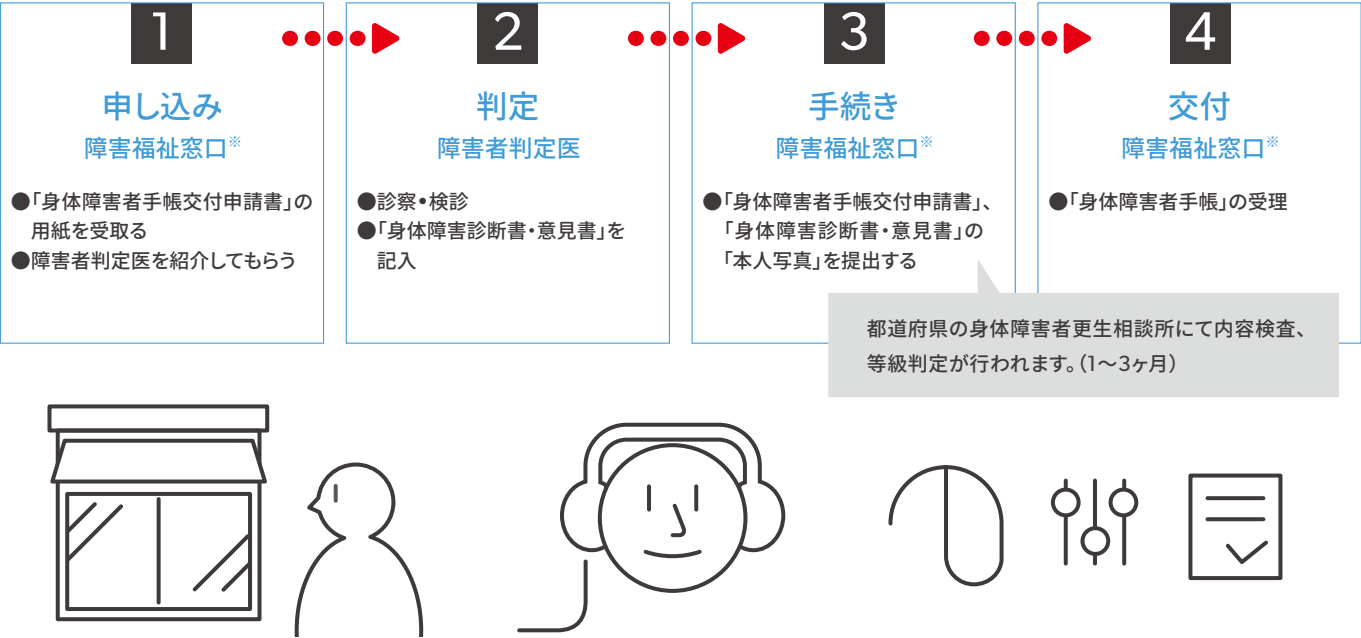

2 補聴器の交付手続き(身体障害者手帳をお持ちの方)

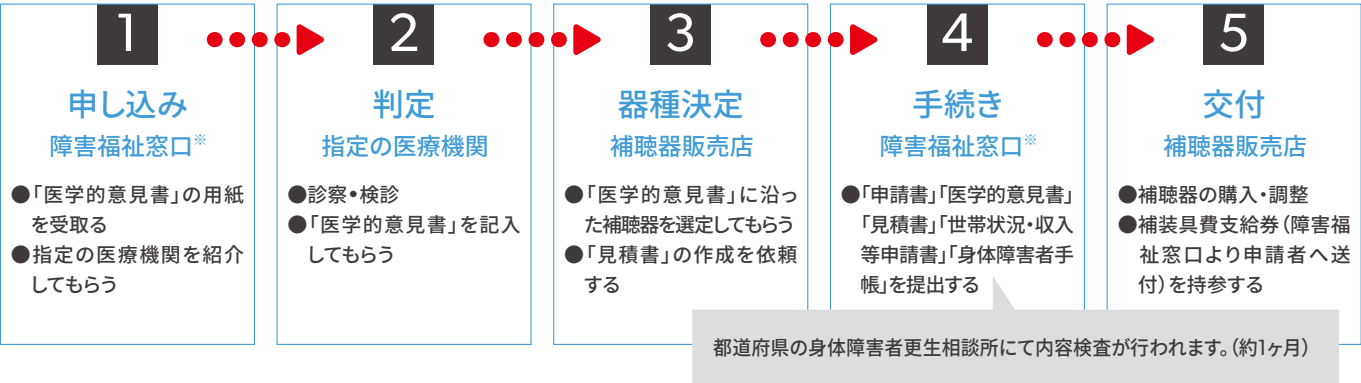

障害者総合支援法とは？

障害者総合支援法には、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉担当窓口へ申請手続きをすることで、原則一律1割の自己負担※で補聴器など補装具の費用が支給される制度があります。

※自己負担額は、原則1割負担となります。ただし、所得によっては例外もあります。

● 聴覚障害等級

級別	対象器種の目安	障害の状態
2級	重度難聴用	両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
3級		両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級	高度難聴用	1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
6級		1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話を理解し得ないもの) 2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

※目安として2級・3級に重度難聴用、4級・6級に高度難聴用の補聴器が支給されますが、例外もありますのでご注意ください。

補聴器の支給を受けるには

まずはお住まいの市区町村の役所内「福祉担当窓口」にご相談ください。
※補聴器支給までの流れが、各市区町村により異なる場合があります。

● 障害者総合支援法 補聴器購入基準価格表

2025年4月1日現在

種目	対象器種の目安	名称	価格	耐用年数	備考
補聴器	重度	重度難聴用耳かけ型 Stretta Aya UP	¥71,200 (非課税)	5年	※価格は電池を含むものであること。 ※身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額が加算されます。 【修理基準】 ●イヤモールド交換：¥9,500 (非課税)
	高度	高度難聴用耳かけ型 Stretta Aya HP	¥46,400 (非課税)		

※自己負担額は、原則1割負担となります。ただし、所得によっては例外もあります。

シグニア最新の障害者総合支援法対応補聴器 言葉と環境音を別々に処理、よりくっきり、すっきり聞こえる




高度難聴用
耳かけ型

ストレッタ アヤ
Stretta Aya HP

32ch

Bluetooth搭載

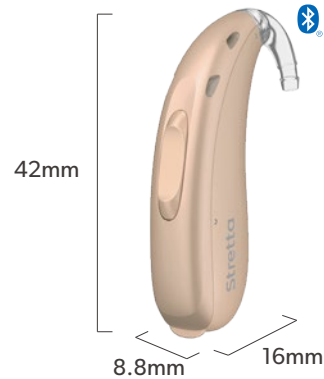

重度難聴用
耳かけ型

ストレッタ アヤ
Stretta Aya UP

32ch

Bluetooth搭載

特徴

2つのプロセッサーで言葉と環境音を別々に処理、よりくっきり、すっきり聞こえる。

32ch 音を高さ(周波数)ごとに32チャンネルに分割して処理、最適な音量・音質でお届け。

● カラーバリエーション
Stretta Aya HP



Stretta Aya UP



2x 2x 2x ダブルプロセッサー

2つのプロセッサーが言葉と環境音を別々に処理。
言葉はよりくっきり、環境音はよりすっきり聞こえる。




超広角センサーで50環境自動対応

周囲360°の声や物音を常に分析、
どこにいても、何をしていても、最適な音をあなたに。



32ch 高精細の多チャンネル設計

雑音としてカットした中には
音声も含まれる。

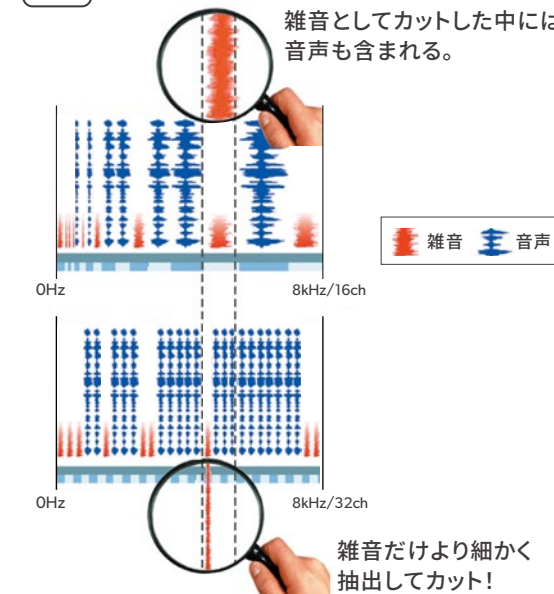

Bluetooth機能搭載で使い方が広がる*1

TV Sound(中継器)経由で
テレビと接続し、テレビの
音声を補聴器に転送して、
自分だけの音量で楽しめる。



ハウリングストッパー2

不快なピーピー音(ハウリング)を
抑制する機能を搭載。食事をしたり、
帽子を目深にかぶった時も安心。



周波数圧縮

聞き取りづらい高い音の
音程を下げて、言葉を
識別しやすく。よりクリアな
聞き取りが可能。



*1 スマートフォンの機種によっては中継器なしで通話音声や動画・音楽の再生音を補聴器に直接ストリーミングして聞くことができます。詳細は5ページの「デバイスとの連携機能」をご確認ください

周辺機器・アプリ

● 周辺機器



①誤作動防止ロック
②ボリュームボタン
③プログラムボタン

ミニポケット
miniPocket
¥22,000 (税込)

手元でかんたんに音量調節やプログラム切り替えができるリモコン。



ストリームラインマイク
StreamLine Mic
¥55,000 (税込)

相手の声が直接補聴器に届くリモートマイク。リモコンとしても使用可能。



TVサウンド
TV Sound
¥33,880 (税込)

テレビの音を直接補聴器に届け、テレビの音がより聞きやすく。

● スマートフォンアプリ



●手元のスマートフォンで補聴器を操作できるから、気づかれない

●様々な機能が1つのアプリに



シグニア アプリ
Signia app



●マスクモード



シグニア アシスタント
●Signia Assistant *1



※必要な OS やスマートフォンの要件は各ストアのアプリダウンロードページの説明をご確認ください。 ※端末・OS 要件を満たしていても組み合わせによってはアプリが正常に作動しない場合があります。
*1 Signia Assistant を使い始めるには、補聴器販売店で機能を ON にする必要があります。補聴器を購入した販売店にご相談ください。定期的に販売店で聴力に合わせて補聴器を調整することをお勧めします

● デバイスとの連携機能

テレビ	iPhone	Android スマートフォン	
	iPhone 11以上かつ OS 15.2以上	ASHA対応かつ Android OS 11以上	その他
TV Soundが必要	 (中継器不要) ダイレクトストリーミング		StreamLine Micが必要

※Android端末は多様な種類があり、ASHA対応であっても、端末のメーカーが定める仕様や搭載OSバージョンにより、表に記載している補聴器との連携機能を利用できない場合があります。お使いのスマートフォンとの接続はこちらもあわせてご確認ください



● 性能一覧

Stretta Aya HP 性能一覧

最大音響利得 (dB)		最大出力音圧レベル (dB)		誘導コイル感度 (dB)	保証	使用電池	電池寿命 (連続使用) (h)
HFA-FOG (±5dB以内)	ピーク (+3dB以下)	HFA-OSPL90 (±4dB以内)	ピーク (+3dB以下)				
71	77	130	135	101	1年	PR48 	13 約135
販売名: 補聴器 Stretta Aya (JIS C 5512:2015 2cc)							

Stretta Aya UP 性能一覧

最大音響利得 (dB)		最大出力音圧レベル (dB)		誘導コイル感度 (dB)	保証	使用電池	電池寿命 (連続使用) (h)
HFA-FOG (±5dB以内)	ピーク (+3dB以下)	HFA-OSPL90 (±4dB以内)	ピーク (+3dB以下)				
74	82	132	140	103	1年	PR44 	675 約285
販売名: 補聴器 Stretta Aya (JIS C 5512:2015 2cc)							

イヤモールド・保証

● 多彩なイヤモールド

	名称	耳かけ型用			適応聴力	特徴
		硬質アクリル	軟質アクリル	ポップフィット		
素材	アクリル製	アクリル製	アクリル製	シリコン製		
		硬質	軟質	超軟質		
色	クリア	クリア	17色			
形状	スケルトン					スタンダードと同じ特徴を持ちますが、外から見える部分を極力削り取りました。地肌が見える部分が多くなるため、スタンダードに比べて目立ちにくくなっています。
	スタンダード					従来から一般に用いられているタイプ。露出部が多いために目立ちやすくなりますが、皮膚との接触面積が広いのでハウリングが起きにくく、重度難聴にも適しています。



スケルトン



スタンダード

● アクリル製イヤモールド (クリアのみ)



● ポップフィットは、選べる17色

クリアカラー



クリア



ローズ



ベージュ



ブラウン



トランスブルー



トランスグリーン



トランスパープル



トランスピンク

ビビットカラー



ブルー



グリーン



パープル



ピンク



レッド



オレンジ



イエロー



ホワイト



ブラック

● 保証

1年修理保証

障害者総合支援法対応補聴器は、お買い上げの日から1年間保証。

※保証期間内に補聴器本体に自然故障が生じた場合、無料で修理いたします。
※紛失および過失による故障は、保証＆サービスの対象外です (その他、詳しい保証規定は添付の保証書によります)。

● 旧JIS規格での性能一覧 (JIS C 5512:2000 イヤシミュレータ)

Stretta Aya HP 性能一覧

最大音響利得 (dB)		最大出力音圧レベル (dB)		保証	使用電池	電池寿命 (連続使用) (h)
1600HZ (±5dB以内)	ピーク (以下)	1600HZ (±5dB以内)	ピーク (以下)			
76	82	134	139	1年	PR48 	13 約135
販売名: 補聴器 Stretta Aya (JIS C 5512:2000)						

Stretta Aya UP 性能一覧

最大音響利得 (dB)		最大出力音圧レベル (dB)		保証	使用電池	電池寿命 (連続使用) (h)
1600HZ (±5dB以内)	ピーク (以下)	1600HZ (±5dB以内)	ピーク (以下)			
77	88	132	146	1年	PR44 	675 約285
販売名: 補聴器 Stretta Aya (JIS C 5512:2000)						

シグニア補聴器

神奈川県大和市中央林間7丁目10番1号 三機大和ビル6F

■ 一般のお客様専用窓口

電話:0800-888-0303/直通:046-289-0303

FAX:046-407-1133

■ 販売店様専用窓口

電話:0800-222-4133/直通:046-409-4133

FAX:0800-888-4133/直通:046-407-1133

販促物注文専用FAX:050-3730-5795



シグニア補聴器

お問い合わせ・公式SNS

www.signia.net/ja-jp/local/ja-jp/signia-info/



聞こえと補聴器の

情報サイト「きこえナビ」

www.kikoe-navi.jp



シグニア補聴器のご相談・ご用命は当店へ

補聴器の装用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察をお勧めします。補聴器は個々に合わせた適切なフィッティング（調整）により効果が発揮されます。しかし、装用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。カタログに掲載されている製品の色や見え方は、印刷等により実際の製品と異なる場合があります。

価格はメーカー希望小売価格です。補聴器は薬機法で定められた医療機器のため非課税対象商品です（アクセサリ・周辺機器を除く）。

カタログに記載されている会社名やロゴおよび製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

本カタログの内容は2025年7月時点のものです。価格や仕様は予告なく変更されることがあります。25.07.JP.17001464

製造販売元:WSオーディオロジージャパン株式会社 医療機器製造販売業許可番号 14B2X00018



6月6日は補聴器の日