

シグニア補聴器

総合カタログ **2025年5月版**



signia

Be
Brilliant™

Be Brilliant™

シグニアは、世界をリードする補聴器ブランドのひとつ。
 私たちが目指すこと、それは補聴器の常識を変える技術革新で、
 人間のパフォーマンスを向上させること。
 難聴だから人生が制限される、そんなことがないように。
 Be Brilliant. シグニアで、もっと鮮やかに。



The succession of 140 years

1878
 Phonophor
 ベルナー・フォン・シメンスが
 難聴者向けの特別な
 電話受信器を發明

1913
 Phonophor Alpha
 真空管アンプを使用した
 ポケットサイズの補聴器



1951
 Auriculina 326
 シメンス初の
 耳かけ型補聴器



1966
 Siretta 339
 シメンス初の
 耳あな型補聴器



2011
 Aquaris
 シメンス初の
 防水・防塵補聴器



SIEMENS COOL
 補聴器の
 新しいカタチ



2016
 プライマックス
primax
 ワイヤレス充電式補聴器
 Cellion
 リチウムイオン充電電池の
 Cellionの登場で、
 充電式補聴器が
 一気にメインストリームに。



2018
 シグニア エヌエックス
Signia Nx
 Stylettoシリーズ
 もう補聴器と呼ばない。
 数々のデザイン賞を受賞した
 革新的なスリム充電式登場。



2020
 シグニア エクスペリエンス
Signia Xperience
 Motion Charge&Go SP X
 世界初[※]、重度難聴対応の
 スーパーパワータイプ
 充電式耳かけ型補聴器。
 ※2021年1月、WSオーディオロジー
 グループ調べ



2022
 シグニア エーエックス
Signia AX
 Inσιο Charge&Go AX
 シグニア初の充電式オーダーメイド
 耳あな型補聴器。
 ワイヤレス充電で取り扱い簡単。



シグニア補聴器
 難聴への取り組み

2023
IX Signia IX
 シグニア IX

世界初[※]、ロックオン機能搭載補聴器。
 複数の相手を追いかけて、会話の言葉の
 すみずみまでより正確に再現します。
 ※2023年9月、WSオーディオロジー
 グループ調べ



シグニア補聴器は、シメンスの140年以上の
 歴史を継承しています。
 革新的な技術の積み重ねは、信頼の証。
 確かな品質と共に、お客様に寄り添う
 誠実なブランドであり続けます。

シグニア補聴器公式
 YouTubeチャンネル
 お役立ち動画はこちら



INDEX

○ 補聴器を選ぶ前に	
140年以上の歴史	1
聞こえのこと・難聴のこと	3
補聴器のこと	5
補聴器の種類	7
補聴器のシリーズとクラス	9
補聴器の機能	11
クラス選びのヒント	13
○ おすすめ補聴器	
Pure Charge&Go IXとStyletto IX	15
Silk Charge&Go IX	17
Inσιο IX	19
Inσιο Charge&Go AX	21
○ Signia IX	
Signia IX テクノロジー	23
Signia IX 7IX/5IX/3IX	25
Signia IX 2IX/1IX	27
○ Signia AX	
Signia AX テクノロジー	29
Signia AX 7AX/5AX/3AX	31
Signia AX 2AX/1AX	33
○ Signia IX、Signia AX用充電器	35
○ その他の補聴器	
Signia Xperience	37
Signia Nx	38
primax	39
Intuis4、Intuis3、Prompt、Fun	40
○ アクセサリー・アプリ等	
アクセサリ・補修パーツ	43
イヤモールド	45
ケアソリューション	46
アプリ・リモコン・周辺機器	47
CROS・BiCROS補聴システム	49
○ カラーバリエーション・性能一覧	
カラーバリエーション	51
RIC型・耳かけ型性能一覧	53
オーダーメイド耳あな型オプション・性能一覧	55
機能比較表	57

補聴器の種類

お悩み

Signia IX

Signia AX

IX AX用

その他

アクセサリ

カラーバリエーション

聞こえのこと 難聴のこと

聞こえのチェック

● こんなことはありませんか？


- 自動車の中での話が、よく聞き取れない
- 人の話し声が小さいように感じる
- 周りの人から、テレビの音が大きいと言われる
- 携帯電話の呼び出し音に気付かないことがある
- 人と会話をするのが面倒に感じる

● こんな聞き間違いありませんか？

- しじ(7時) ←→ いちじ(1時)
- しろい(白い) ←→ ひろい(広い)
- たかな(高菜) ←→ さかな(魚)

該当する場合は
聴力が低下しているかもしれません


耳の構造と役割

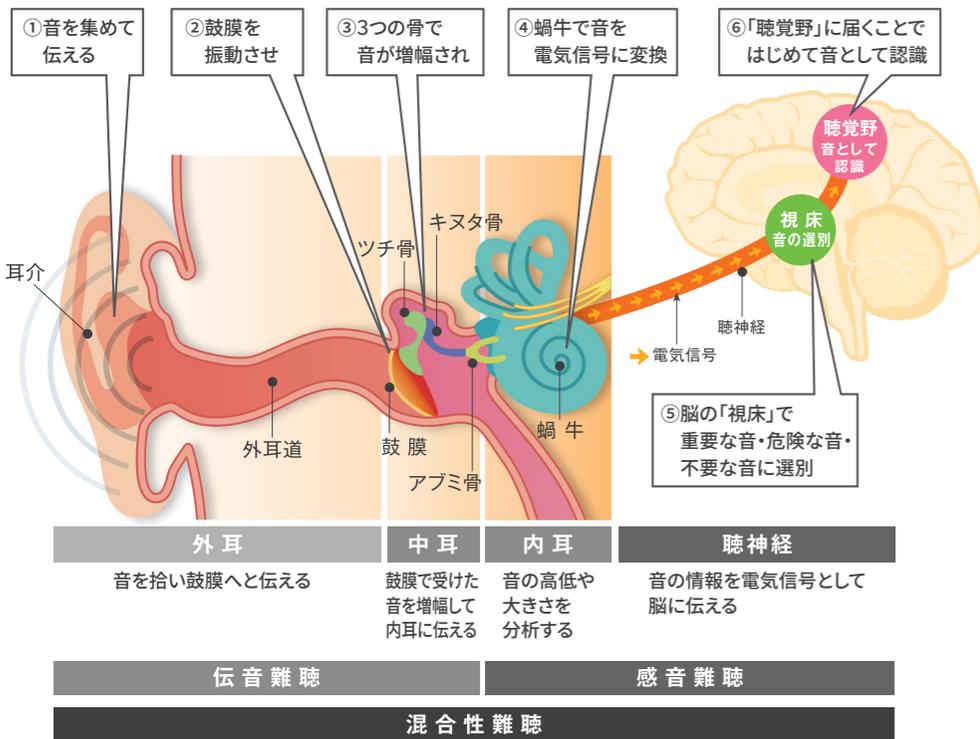

難聴の種類	解説
伝音難聴	中耳炎や鼓膜の損傷・病気などが原因で、音が伝わりにくくなることによる難聴。医学的に治療できるケースも。難聴が残る場合は補聴器を使う事もある。
感音難聴	加齢や病気、長時間騒音下にいることなどが原因の難聴。医学的治療では治らず、補聴器を使うケースも。難聴レベルや周りの状況によっては、補聴器を装着しても聞き取りが困難なケースもある。
混合性難聴	伝音難聴と感音難聴の両方が同時に起こる難聴。

加齢による聴力低下

- 難聴は年を重ねるにつれ、誰にでも起こりうるもの。
- 聴力の低下は30代からすでに始まっている。
- 難聴が進むと高い音から聞きづらくなり、聞こえる音が減っていく。
- 加齢性難聴は自分では気づきにくい。

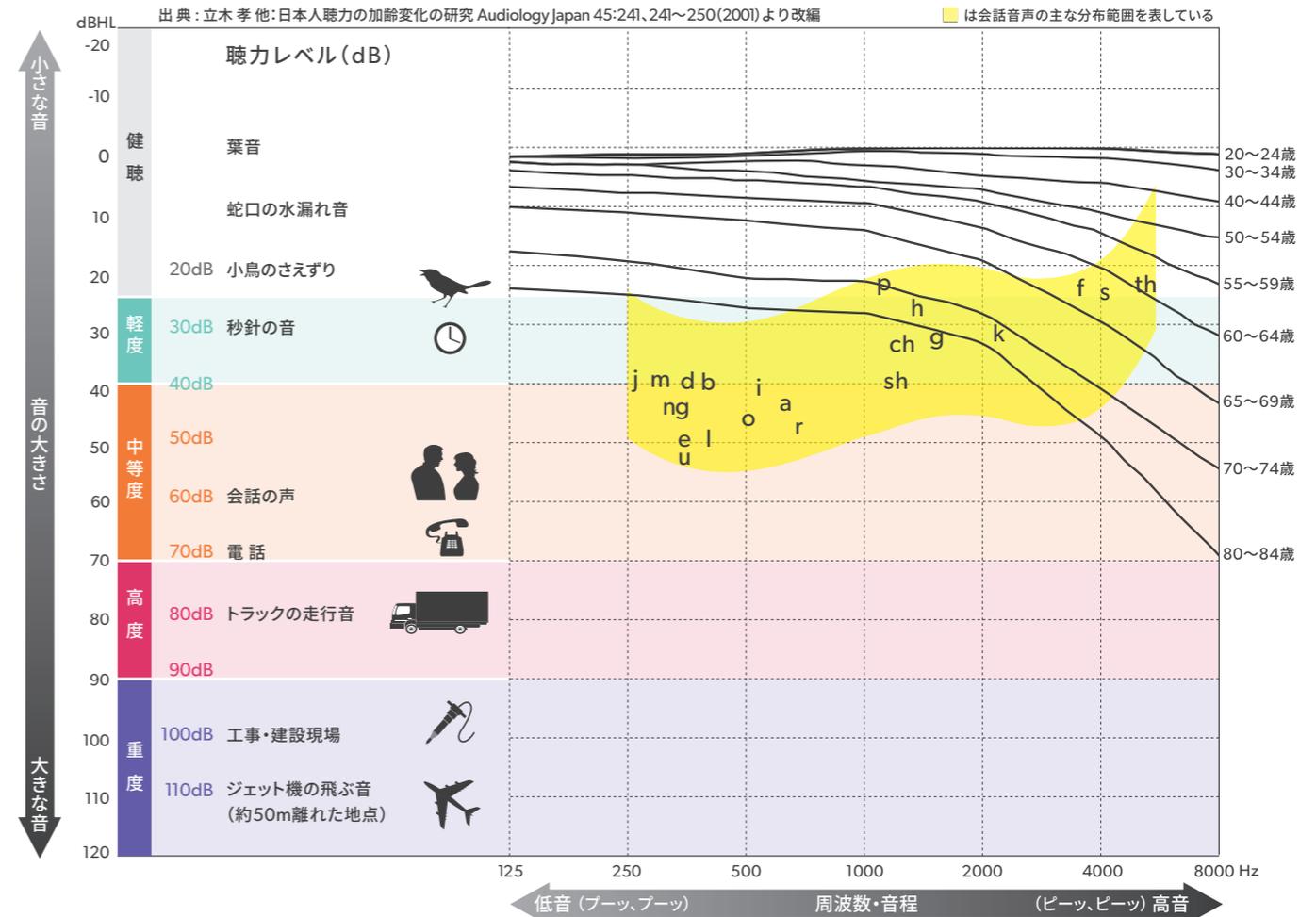

聞こえの目安

軽度難聴 25dBHL~40dBHL	中等度難聴 40dBHL~70dBHL	高度難聴 70dBHL~90dBHL	重度難聴 90dBHL以上
<ul style="list-style-type: none"> ・小さな声やささやき声が聞き取りにくい ・テレビの音が大きいと言われる 	<ul style="list-style-type: none"> ・普通の会話聞きづらい ・自動車がそばに来て初めて気づく 	<ul style="list-style-type: none"> ・大きな声でも聞きづらい ・大きな声でも聞き間違いが多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・耳元での大きな声も聞きづらい

聞こえの仕組み、難聴補聴器購入の流れについての動画はこちら



補聴器の種類
おすす
Signia K
Signia AX
IX AXE
その他
アクセサリ
性能一覧
カラーバリエーション

補聴器はなぜ必要？

難聴の場合、早いタイミングで適切な補聴器をつけると、いろいろなメリットがある。

● より良いコミュニケーション

音がよく聞こえるようになると、家族や友人と話をすることが楽しくなる。



● 人間関係と心の健康

人生100年時代。コミュニケーション不足によって人間関係が疎遠になるのを防ぎ、あなたの新しい挑戦を応援する。



● 生活上の危険の回避

音で周囲の状況を把握し、危険を未然に防ぐのを助けてくれる。




● 音で脳に良い刺激を与える

聴覚刺激を増やすことで、「楽しい」「うれしい」などの情動を引き起こし脳機能を活性化できるといわれている。



補聴器購入の流れ

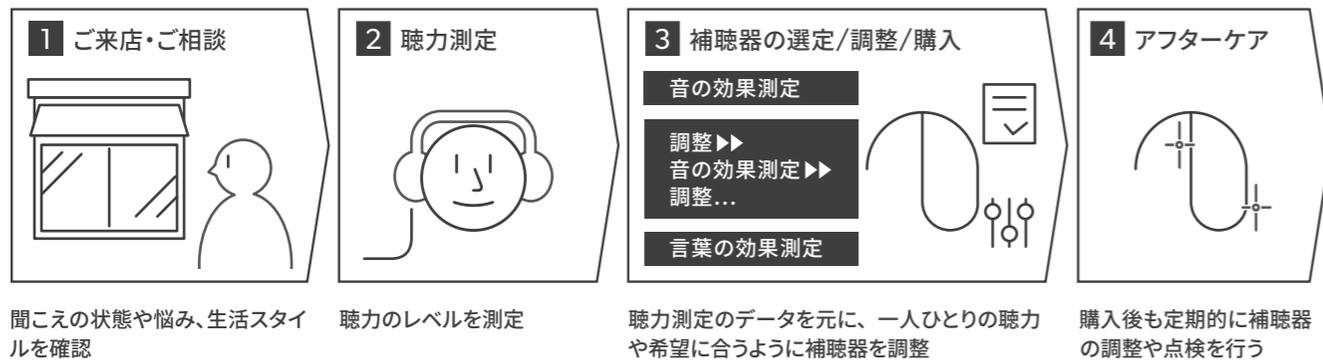

両耳装用のすすめ

- POINT 1** 左右両方の脳の働きを活かす
- POINT 2** 疲れにくいからより長く使える
- POINT 3** 方向感や距離感をよりつかみやすい
- POINT 4** 騒音下での聞き取りが良い


片目だけで見るとは疲れやすい
片耳だけの補聴器も同様

両耳装用で、より快適で自然な聞こえを実現

両耳装用は満足度が高いという調査結果があります。

	満足度	平均使用時間/日	全く使用しない
両耳装用	54%	8.9	2%
片耳装用	45%	6.7	12%

「日本補聴器工業会ホームページ JapanTrak」より

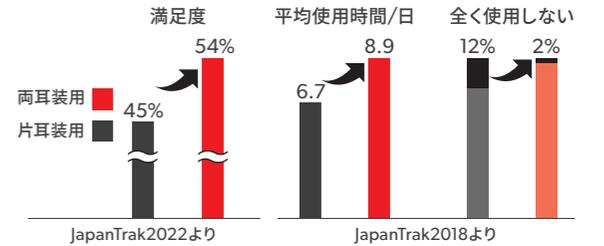

使いこなすにはトレーニングと調整が重要

- 補聴器で再び聞こえ出した音に脳が慣れるまでには時間がかかる。
- 最初の数ヶ月間は聞こえ方が変化。
- 毎日つけてトレーニングすることが大事。
- 定期的にお店に通い、その時の聞こえに一番合うように調整してもらう。



補聴器のシリーズとクラス

シリーズ

補聴器の心臓部である、音声を処理するプロセッサーは、技術進歩につれてどんどん進化しています。シグニア補聴器は、その「シリーズ」ごとに違うプロセッサーを搭載しています。新しいシリーズほど、プロセッサーの処理能力がパワフルで、多くの機能が搭載され、より高度な音声処理ができます。

騒がしい場所でもしっかり聞こえることを目指す、シグニア補聴器の音声技術の進化。

最新



Signia IX
シグニア IX

世界初※、ロックオン機能搭載補聴器。複数の相手を追いかけて、会話の言葉のすみずみまでより正確に再現します。

※2023年9月、WSオーディオロジーグループ調べ


毎秒
1,000回
音を分析

データ
192,000個
を収集

聞き取り
25%
向上

さらに他のシリーズに比べ、5/3/2クラスはチャンネル数が向上

2022年

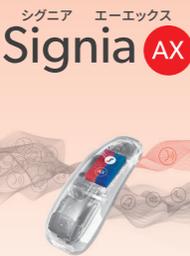

Signia AX
シグニア エーエックス

世界初※、2つの頭脳で言葉と環境音を別々に処理するダブルプロセッサー補聴器。

※2021年4月、WSオーディオロジーグループ調べ

言葉



環境音



ダブルプロセッサー

言葉がよりくっきり
環境音がよりすっきり

2020年



Signia X Experience
シグニア エクスペリエンス

世界初※、Xセンサー搭載補聴器。100シーン自動対応。どこにいても、何をしても、最適な音をあなたに。

※2019年10月、シバントスグループ調べ

超広角センサー

周囲360°の声や物音を常に分析、400パターンの中から最適な音質に自動で変化。



モーションセンサー

座れば前方フォーカス、散歩中はワイドに、聞こえを自動で最大化。



周りの環境

100シーン自動対応

あなたの動き

クラス


シグニア補聴器は、性能と搭載機能の違いにより下記5つのクラスに分かれています。より上位のクラスほど性能が良く、活用できる場面が広がります。保証も手厚くなります。

	7 プレミアム シグニア補聴器の最上位クラス	5 アドバンス ワンランク上の聞こえを実感	3 スタンダード テレビや電話もクリアに聞こえる	2 ベーシック 屋内外の快適さを重視	1 バリュー 基本性能を搭載
保証	3年修理保証 / 2年紛失保証	3年修理保証 / 2年紛失保証	2年修理保証 / 1年紛失保証	2年修理保証	2年修理保証
チャンネル	48ch	36ch	32ch	24ch	16ch
搭載機能	多い				少ない

※Signia IXの場合の、各クラスの機能差のイメージ

●チャンネルとは

「チャンネル」は性能を表す重要な指標の一つです。シグニアの補聴器はマイクに入ってきた音を高さ(周波数)ごとに分割し別々に処理を行い、最適な音量・音質で耳に届けます。チャンネル数が多いほど、音が細かく分割され、きめ細かい処理ができ、より生音に近い静かでハッキリとした音質に近づきます。

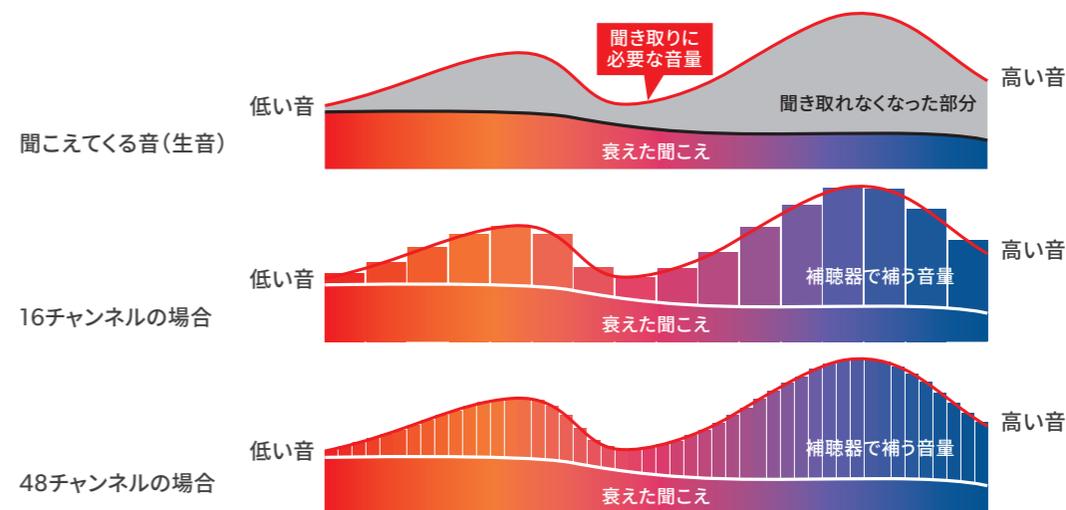

※画像はイメージです。装着者の聞こえの状態によっては、効果が異なる場合があります

補聴器の機能

クラスごとのチャンネル数、保証と機能

各シリーズの対応クラス	故障や紛失時に	きめ細かい聞こえ	IX シグニア IX に搭載		Signia AX に搭載												
			騒がしい場所での複数人の会話	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋外	屋内・集会所	買い物・リハビリ施設	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	デイサービス・病院	車・電車	超高音質	
IX Signia IX シグニア IX	保証*1	チャンネル*2	ロックオン*3	ダブルプロセッサー*4	ライブサウンド*5	Xセンサー超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	Xセンサーモーションセンサー*6	OVP2.0*7	ビーム指向性*8	パワーエンハンス*9	スピーチフォーカス*4	反響音抑制*10	スピーチフォーカス360°*8	12kHz帯域対応	
Signia AX																	
7 プレミアム シグニア補聴器の最上位クラス	3年修理保証 2年紛失保証	48ch															
5 アドバンス ワンランク上の聞こえを実感	3年修理保証 2年紛失保証	IX 36ch AX 32ch															
3 スタンダード テレビや電話もクリアに聞こえる	2年修理保証 1年紛失保証	IX 32ch AX 24ch															
2 ベーシック 屋内外の快適さを重視	2年修理保証	IX 24ch AX 16ch															
1 バリュー 基本性能を搭載	2年修理保証	16ch															

*1 詳しくは裏表紙に記載 *2 Signia IXシリーズの5/3/2クラスはチャンネル数が向上 *3 詳細は23、24ページをご確認ください。RIC型7/5/3クラスとInsio IXのツインマイク器種(ワイヤレス機能あり)7/5/3クラスは両耳装着時に「ワードロックオン」と「スピーチロックオン」両方対応。それ以外の器種/クラスは「ワードロックオン」機能のみ対応 *4 シングルマイク器種非対応 *5 7/5/3クラスは、より進化したライブサウンドプラスを搭載。詳しくは29ページをご確認ください *6 Silk Charge&Go IX、Insio IXは非対応 *7 耳あな型はOVP機能非対応 *8 Silk Charge&Go IX非対応、Insio IXのシングルマイク器種またはノンワイヤレスを選択した場合非対応 *9 Silk Charge&Go IXは両耳装着で対応、Insio IXのシングルマイク器種はワイヤレス機能あり(標準)の場合両耳装着で対応、ノンワイヤレスを選択した場合非対応 *10 7クラスは、反響音抑制機能が自動で働く。5クラスは手動でプログラム切替が必要

※各機能の詳細は巻末の機能比較表をご参照ください

補聴器を詳しく知りたい

おすすすめ

IX シグニア IX

Signia AX

IX AX用

充電器

その他

アクセサリ
アプリ等

カラーバリエーション
性能一覧

クラス選びのヒント

「チャンネル数」や「搭載機能」、「保証」等の違いによって、より上位のクラスほど、より快適に安心して補聴器を使えるサポートが充実しています。生活スタイル、利用シーンに合わせてクラスをお選びください。

クラス

7

プレミアム
シグニア補聴器の最上位クラス

5

アドバンス
ワンランク上の聞こえを実感

3

スタンダード
テレビや電話もクリアに聞こえる

2

ベーシック
屋内外の快適さを重視

1

バリュー
基本性能を搭載

こんな方におすすめ

旅行や習い事など様々な場面で
快適に使用したい方



大人数での会話やお出かけ先でも
楽に使用したい方



外食や騒がしい場所での会話も
楽しみたい方



外出先でも快適に使用したい方








自宅中心で使用する方



6つの要素

グラフでの数値が
高いほど、性能が良く、
より快適に使える

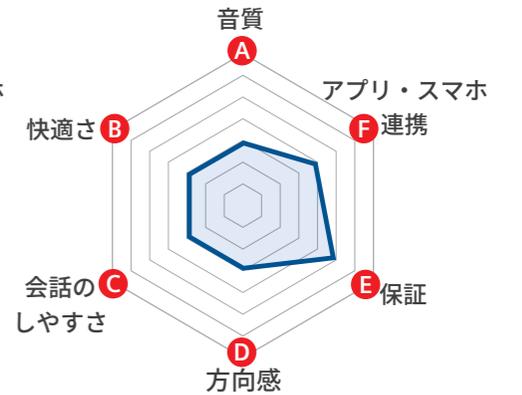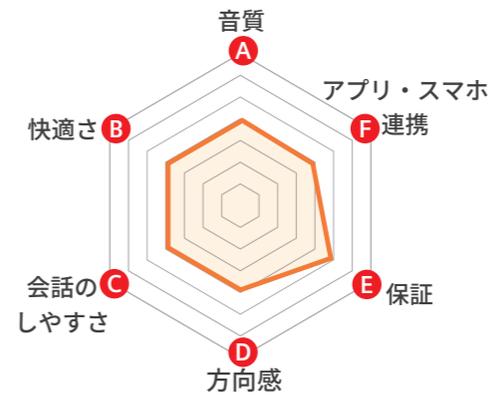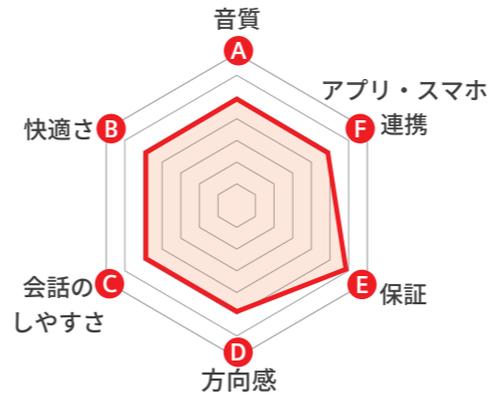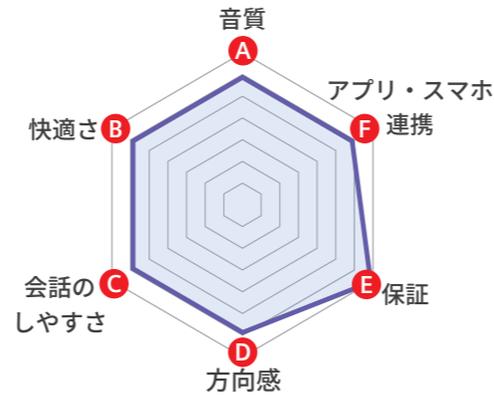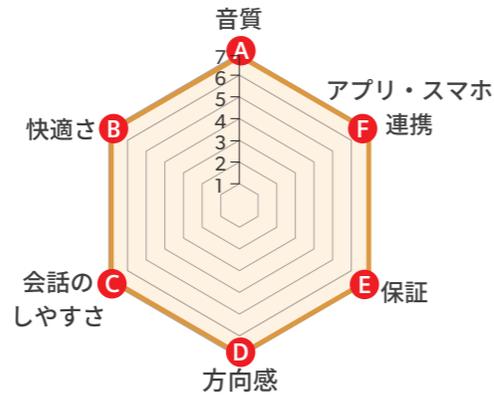

各要素を支える機能やサービス

A 音質

音がより自然に聞こえる。会話だけでなく、音楽や環境音にも影響。



B 快適さ

雑音や突発音等、耳障りな音を抑える力。外出の際には特に活躍。



C 会話のしやすさ

様々な環境でも人の声をしっかり聞き取る力。会話がスムーズになる。



D 方向感

聞きたい方向の声をしっかりとらえ、その他の雑音を抑える力。



E 保証

安心につながる修理の保証期間と、紛失した場合の保証の有無。



F アプリ・スマホ連携

スマホアプリで音量等の調節、電話の声が直接補聴器から聞こえる機能の有無。



※Signia IXの場合の各クラスの性能差のイメージ

補聴器を詳しく知ろう

おすすすめ補聴器

IX シグニア

Signia AX

IX AX用充電器

その他補聴器

アクセサリ：アプリ等

カラーバリエーション性能一覧

おすすめ
補聴器



IX

世界初※「ロックオン」機能搭載
RIC型の定番、高機能な充電式補聴器
※2023年9月、WSオーディオロジーグループ調べ



コンパクトな充電ケースで
外出先でも充電可能

IX Signia IX
シングニアIX



ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go IX



実寸大
軽 中 高 重
S:~60dB M:~75dB
P:~90dB HP:~100dB

使用可能時間の目安

充電時間 使用可能時間
4時間フル充電 28時間

選べる充電器



ポータブル充電ケース

※充電器の詳細は35、36ページをご確認ください



ドライ&クリーン充電器


UV除菌
乾燥



軽 中 高 重
目立たず、
幅広い聴力に対応。



コンパクトなのに
フル充電で28時間も使用可能。

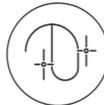

洗練された形状は耳の後ろにぴったりフィット。
エレガントな10色展開。

【カラーバリエーション】



ベージュ ブラック パールホワイト サンディブラウン ダークシャンパン ディープブラウン ローズゴールド シルバーヒーロー グラファイト ファインゴールド



聴覚業界の優れた革新的技術を称える
ヒアリングテクノロジー
イノベーターアワード2024 受賞。



受賞歴のある洗練されたデザインを継承、
スリムなボディはメガネとの相性抜群。



シングニア最小の充電ケースはQi規格対応。
Qi充電パッドに置くだけでケースごと充電可能。

【カラーバリエーション】



ブラック/グラファイト スノーホワイト/ローズゴールド
7/5/3クラスのみ
ブラック/シルバー スノーホワイト/シルバー
7/5/3クラスのみ



※Qi充電パッドは市販品をご使用ください

New
スタイレット
Styletto IX



実寸大
軽 中 高
S:~60dB M:~75dB P:~90dB

使用可能時間の目安

充電時間 使用可能時間
4時間フル充電 20時間

選べる充電器



Qi規格対応ポータブル充電ケース

※充電器の詳細は35、36ページをご確認ください。



ドライ&クリーン充電器

UV除菌
乾燥

共通 機能



複数人の声を追いかけて、言葉のすみずみまでより正確に再現。
騒がしい環境でも、一人ひとりの声が常に聞き取りやすく。



ポータブル充電ケースは外出先でもらくらく充電、
乾燥・除菌機能付きドライ&クリーン充電器も選択可能。




テレビ*1・スマートフォンの音が補聴器に直接届く。
スマホを手を持たずに、補聴器をさわるだけで通話可能。*2



Signia app対応、スマートフォンが補聴器のリモコンに。
補聴器利用をさらに便利にするサポート機能が充実。*2

クラス	保証	チャンネル	機能													
			Bluetooth*1,2	ロックオン*3	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	Xセンサーモーションセンサー	OVP2.0	ビーム指向性	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360°
7IX	3年保証 2年保証	48ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5IX	3年保証 2年保証	36ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3IX	2年保証 1年保証	32ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2IX	2年保証	24ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1IX	2年保証	16ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*1 TV視聴は別途StreamLine TVが必要 *2 詳しくは47、48ページをご確認ください *3 詳しくは23、24ページをご確認ください。 *4 HPLシーラーは別途費用がかかります。詳細は43ページをご確認ください

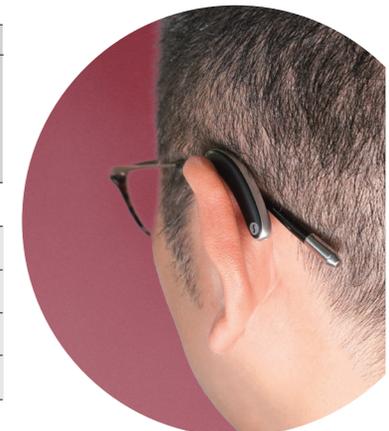

補聴器を運ぶ前に
お好みの
補聴器
Signia IX
充電器
IX AX用
その他
補聴器
アクセサリ！
アプリ等
性能一覧
カラーバリエーション

おすすめ
補聴器



IX 世界初*1、超小型充電式耳あな型補聴器
Silk Charge&Go IX



電池交換不要で手間いらず
●わずらわしい電池交換が不要
●電池の買い忘れ心配なし



小さく、軽く、快適なつけ心地
おしゃれな充電ケースでどこでも安心充電

IX Signia IX
シグニアIX

シルク チャージ&ゴー
Silk Charge&Go IX シングル
マイク

実寸大



軽 中

ノーマル: 114/50 ~70dB



CES 2024ベスト・オブ・イノベーション賞受賞
本賞は優れた先端技術と製品を表彰する国際的な賞です。CES 2024では3000件以上の審査対象から、最高の評価を得た製品36件のみが受賞。



世界三大デザイン賞の一つである
レッドドット・デザイン賞2024受賞

reddot winner 2024



充電耳あな型最小クラス
世界最小クラスのコンパクトサイズ、
「見えない補聴器」を求める方に最適。



小さくても使いやすさを追求した充電式
電池を扱う必要がないので、どなたでも使いやすい。
一回の充電で28時間使え、
外出先でも充電ケースだけで充電可能。



補聴器をケースに入れて、
ケースごとQi規格充電パッドに置くだけで充電可能。
もちろんUSB充電も使える。

使用可能時間の目安

充電時間 使用可能時間
4時間フル充電 28時間



※充電器の詳細は35、36ページをご確認ください。Qi充電パッドは市販品をご使用ください

【カラーバリエーション】

フェイスプレート



ブラック



モカ

シェルカラー



左耳用:スケルトンブルー



右耳用:スケルトンレッド

左右色違いで識別しやすい



自然なつけ心地
耳あなの自然な隙間で通気性抜群、
既製耳あな型ならではの快適なつけ心地を実現。



どんな耳でもフィットしやすい
柔らかい既製耳せんでシルクのような装用感、
耳せんは豊富な種類から選べる。



スマートフォンでもリモコンでも操作可能、
より手軽に、よりスマートに扱える。

【無料スマートフォンアプリ】



Signia app

【リモコン】



ミニポケット
miniPocket
¥22,000 (税込)

シングルマイク器種用機能表

クラス	保証	チャンネル	機能										
			Bluetooth	ロックオン ^{*2}	ライブサウンド ^{*3}	Xセンサー 超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	ワンマイク 指向性 ^{*4}	パワー エンハンス ^{*4}	反響音抑制	12kHz帯域 対応	
7IX	3年 修理保証 2年 初年保証	48ch	●	●	● プラス	●	●	●	●	● 両耳	● 両耳	● 自動	●
5IX	3年 修理保証 2年 初年保証	36ch	●	●	● プラス	●	●	●	●	●	●	●	●
3IX	2年 修理保証 1年 初年保証	32ch	●	●	● プラス	●	●	●	●	●	●	●	●
2IX	2年 修理保証	24ch	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
1IX	2年 修理保証	16ch	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○

*2 詳細は23、24ページをご確認ください。ワードロックオン機能のみ対応 *3 OVP機能非対応 *4 Insio IXはワイヤレス機能あり(標準)の場合両耳装用で対応、ノンワイヤレスを選択した場合非対応

〈販売名〉補聴器 Silk IX



*1 2023年8月、WSオーディオロジーグループ調べ(医療機器認証を受けた補聴器として)

補聴器を選ぶ前に

お悩み解決

IX Signia IX
シグニアIX

Signia app

IX AXN用
充電器

その他

アクセサリ
アプリ等

性能一覧
カラーバリエーション



シグニア最新技術 IX Signia IX シグニアIX 搭載
ぴったりフィット、オーダーメイド耳あな型補聴器



豊富な製品ラインナップから
あなたの聞こえに合わせて自由にカスタマイズ

インシオ
Insio IX



IIC シングルマイク



耳の奥深く収まるように巧みに設計され、横からみてもほぼ見えない**極小サイズ**。



CIC シングルマイク



高度難聴まで対応の小型サイズ。環境スイッチが標準装備。



New ITC シングルマイク



耳あな型補聴器の標準的なサイズ。扱いやすく、つけ外し簡単。



New ITC TWIN ツインマイク



耳あな型補聴器の標準的なサイズ。2つの集音マイクで「ロックオン」フル対応。騒音下のグループ会話もより聞き取りやすく。



New ITE TWIN ツインマイク



より大きく耳にしっかり収まるサイズ。



※写真はInsio IX ITCです



スマートフォンでも
リモコンでも操作可能。

【無料スマートフォンアプリ】




【リモコン】



オーダーメイドならではの
オプションでさらに簡単・便利に。

名入れ
お好きな文字6文字
の刻印が可能
(カタカナ)

テグス
つけ外しが
しやすいように

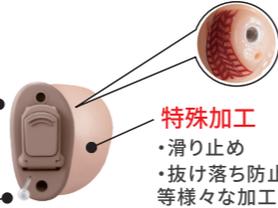

ツインマイク器種用機能表

※シングルマイク器種用機能表は18ページをご確認ください

クラス	保証	チャンネル	機能												
			Bluetooth	ロックオン	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	ビーム指向性	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360°	12kHz帯域対応
7IX	3年保証 2年保証	48ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5IX	3年保証 2年保証	36ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3IX	2年保証 1年保証	32ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2IX	2年保証	24ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1IX	2年保証	16ch	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	

*1 詳細は23、24ページをご確認ください。Insio IXのツインマイク器種(ワイヤレス機能あり)7/5/3クラスは両耳装着時に「ワードロックオン」と「スピーチロックオン」両方対応。それ以外は「ワードロックオン」機能のみ対応 *2 シングルマイク器種またはノンワイヤレスを選択した場合非対応 *3 OVP機能非対応 *4 Insio IXのシングルマイク器種はワイヤレス機能あり(標準)の場合両耳装着で対応、ノンワイヤレスを選択した場合非対応 *5 シングルマイク器種非対応



ダブルプロセッサー搭載
フルスペック充電式耳あな型補聴器



電池交換不要で手間いらず

- わずらわしい電池交換が不要
- 電池の買い忘れ心配なし



汗水に安心

- 高い防水性と防塵性
- 国際保護等級最高位のIP68
- ※ 完全防水ではありません

シグニア エーエックス
Signia AX



インシオ チャージ&ゴー
Insio Charge&Go AX

実寸大



ワイヤレス充電ITC

軽 中 高

ノーマル：113/50 ~70dB
パワー：118/55 ~80dB
ハイパワー：124/65 ~90dB



ワイヤレス充電ITE

軽 中 高

パワー：118/55 ~80dB
ハイパワー：124/65 ~90dB



オプション

HS(ハーフサイズ)

ITEを可能な範囲で小さく製作

【カラーバリエーション】



ブラック



ベージュ



国際的に権威のあるデザイン賞
「iFデザインアワード2022」受賞

2022年度「グッドデザイン賞」受賞



あなたの耳にあわせて丁寧に製作、オーダーメイドだから抜群のフィット感。



扱いやすいサイズでつけ外し簡単。マスクやメガネの邪魔にもなりにくい。



本体の操作だけでテレビの音声を聞いたり、*1プログラム切替ができるので便利。



iPhoneもAndroidスマートフォンも、通話・音楽が直接補聴器に届いて聞ける。iPhoneは電話を持たずにハンズフリーで通話できる。*2



耳あな型最高の防水性能IP68搭載、汗かきや水仕事でも安心。

シェル形状選択の目安

内部部品ユニット：高速演算やワイヤレス充電を司る、補聴器内部で大きな容積を占めるパーツです。

実寸大



充電器



充電器にポンと置いたら充電できるワイヤレス充電で扱いがらくらく。左右の充電スロットが色違いで識別しやすい。

使用可能時間の目安

充電時間 4時間
フル充電

使用可能時間 28時間

内部部品ユニットが耳のくぼみに収まる場合

ワイヤレス充電ITC



※ 耳の形状によっては、仕上がりがくぼみに収まりきらない場合があります

内部部品ユニットが耳のくぼみに収まらない場合

ワイヤレス充電ITE



※ 可能な範囲で小さく製作するHS(ハーフサイズ)もあります



※ 充電器の詳細は35、36ページをご確認ください



クラス	保証	チャンネル	機能															
			Bluetooth *1 *2	ロックオン	ダブルプロセッサー	ライブサウンド *3	Xセンサー超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	Xセンサーモーションセンサー	OVP2.0 *3	ビーム指向性	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360°	12kHz帯域対応	
7AX	3年保証 2年保証	48ch	●	—	●	● プラス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5AX	3年保証 2年保証	32ch	●	—	●	● プラス	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	
3AX	2年保証 1年保証	24ch	●	—	●	● プラス	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	
2AX	2年保証	16ch	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
1AX	2年保証	16ch	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

*1 TV視聴は別途StreamLine TVが必要 *2 詳しくは47、48ページをご確認ください *3 Insio Charge&Go AXはOVP機能非対応

〈販売名〉補聴器 AXシリーズ カスタム



IX Signia IX
シグニア IX

世界初 *1 ロックオン機能搭載補聴器。
複数の相手を追いかけて、会話の言葉の
すみずみまでより正確に再現します。



会話が聞き取りにくい環境をご存知ですか。騒がしい中での数人との会話だと言われています。
シグニア最先端技術搭載のSignia IXシリーズ補聴器は、騒がしい環境でリアルタイムの会話をより聞き取りやすくします。



BIGイノベーション・アワード2024受賞
革新的な方法で新しいアイデアを実現している
製品を表彰する世界的なビジネスアワード




音声処理が不足して、言い出しや輪郭がぼやけます。
騒がしい中や複数人だと、さらに聞き取りにくくなります。




話し手を捉え、膨大なデータを収集して素早く処理し、
言葉の一つ一つの音をより正確に再現します。

「ロックオン」を支える2つの技術

言葉のすみずみまで余さず取り込む
言葉明瞭化
(ワードロックオン)

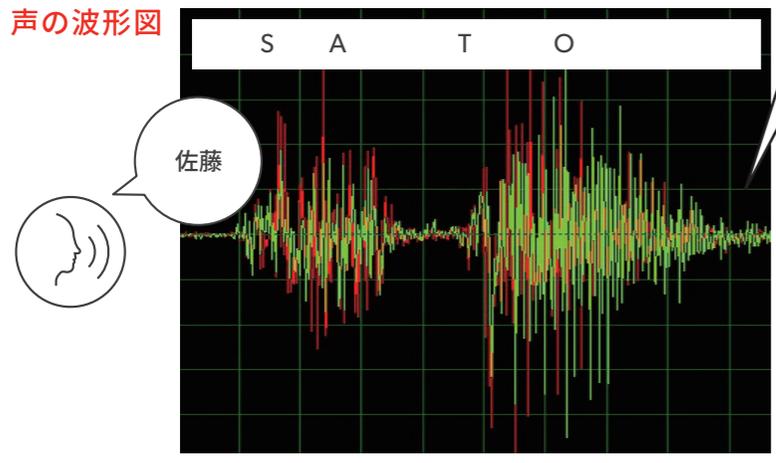

赤い線: IX Signia IX
シグニア IX
緑の線: 一般的な補聴器
Signia IXは言葉の手掛かりになる細かい部分(赤い線)がしっかり出ています。

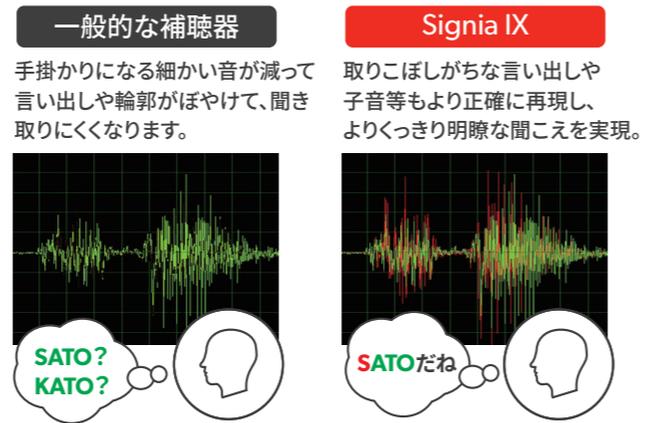

動いても、何人でも、声を追いかける
会話捕捉 *4
(スピーチロックオン)


7IX マルチで捕捉
全員をロックオン、動いてもロックオン。
すべての相手の声をよりくっきりさせます。



5IX デュアルで捕捉
相手がいるエリアと、向かいの相手の2つに
ロックオン、相手の中でも正面の声をよりく
っきりさせます。



3IX シングルで捕捉
言葉と環境音を別処理した上で、相手がいる
エリア全体をロックオン。環境音をさらに抑え
てより聞き取りやすくなります。

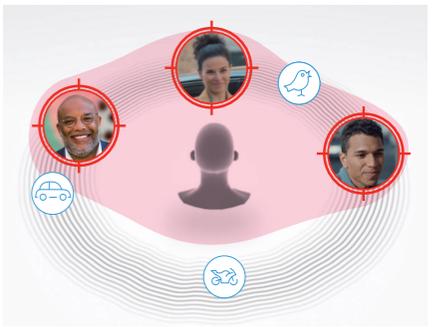

*1 2023年9月、WSオーディオロジーグループ調べ *2 Signia IXシリーズ7クラスの場合 *3 騒音下ロックオン機能の有無で比較した場合 *4 RIC型7/5/3クラスとInsio IXのツインマイク器種(ワイヤレス機能あり) 7/5/3クラスは両耳装着時に「ワードロックオン」と「スピーチロックオン」両方対応。それ以外の器種/クラスは「ワードロックオン」機能のみ対応 ※画像は聞こえのイメージです

補聴器を運ぶ前に
おすす
補聴器
IX
Signia IX
充電器
IX AXN
その他
補聴器
アクセサリ
アプリ等
性能一
カラーバリエーション

飛び交う会話の一部になろう

機能

- *5 ロックオン
- *10 ダブルプロセッサー
- *7 ライブサウンド
- *6 SENSOR
- *6 OWN VOICE PROCESSING OVP2.0
- *6 Bluetooth
- *4 ハンズフリー通話
- *4 Signia app
- *6 Signia Assistant
- TRT (詳しくは40ページをご覧ください)

コーティング RIC型・耳かけ型

- 防水・防塵 IP68
- ナノコートで撥水
- 防水・防塵 IP68

既製耳あな型

安心保証 7IX/5IX

- 3年修理保証
- スマートリペア (保証期間以降も安心)
- 2年紛失保証


3IX

- 2年修理保証
- スマートリペア (保証期間以降も安心)
- 1年紛失保証

詳しくは裏表紙に記載



- こんな方におすすめ
- 横や後ろの音が聞き取りづらい
 - もっと自然な音で楽に使用したい
 - 散歩や買物など外出する機会が多く、歩きながらの会話が多い

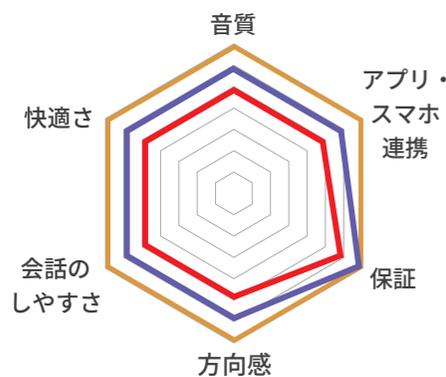

タイプ	充電式 RIC 型	充電式耳あな型
器種	<p>スタイリッシュ充電式 スタイレット Styletto IX</p> <p>充電</p> <p>選べる充電器</p> <p>UV除菌乾燥</p>	<p>充電式RIC型 ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go IX</p> <p>充電</p> <p>選べる充電器</p> <p>UV除菌乾燥</p>
適応聴力	<p>軽 中 高</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB</p>	<p>軽 中 高 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB</p>
販売名	補聴器 IXシリーズ	
価格	充電式	
7IX	両耳 ¥1,224,000*2	片耳 ¥634,000*2
5IX	両耳 ¥844,000*2	片耳 ¥444,000*2
3IX	両耳 ¥574,000*2	片耳 ¥309,000*2

電池式耳あな型				
Insio IX				
<p>極小 アイアイシー IIC</p> <p>10A</p>	<p>小型 シーアイシー CIC</p> <p>10A</p>	<p>標準的サイズ アイティーシー ITC</p> <p>312</p>	<p>標準的サイズ・多機能 アイティーシー ツイン ITC TWIN</p> <p>312</p>	<p>大きめ・多機能 アイティーイー ツイン ITE TWIN</p> <p>312</p>
<p>軽 中</p> <p>ノーマル: 113/50 ~70dB</p>	<p>軽 中 高</p> <p>ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/60 ~90dB</p>	<p>軽 中 高</p> <p>ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/60 ~90dB</p>	<p>軽 中 高</p> <p>パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/60 ~90dB</p>	
補聴器 IXシリーズ カスタム				
電池式				
両耳 ¥1,180,000		片耳 ¥590,000		
両耳 ¥800,000		片耳 ¥400,000		
両耳 ¥530,000		片耳 ¥265,000		

*1 HPLシーバーは別途費用がかかります。詳しくは43ページをご確認ください *2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります *充電器/充電ケースは35、36ページ、カラーは51、52ページをご覧ください *補聴器は非課税です

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	騒がしい場所での複数人の会話	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋外	屋内・集会所	買い物・リハビリ施設	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	デイサービス・病院	車・電車	超高音質
チャンネル	*3~4*6 Bluetooth	ロックオン	*5	ダブルプロセッサー	*10	Xセンサー 超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	Xセンサー モーションセンサー	*6	ビーム指向性	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	*11	スピーチフォーカス360°	12kHz帯域対応
7IX	48ch	●	●	スピーチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5IX	36ch	●	●	スピーチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3IX	32ch	●	●	スピーチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

自分で簡単に補聴器の音を調節

【無料スマートフォンアプリ】

Signia app

【リモコン】

ミニポケット miniPocket ¥22,000 (税込)

テレビや電話の音を楽しむ

【音声ストリーミング用周辺機器】

ストリームラインTV StreamLine TV ¥33,880 (税込)

ストリームラインマイク StreamLine Mic ¥55,000 (税込)

補聴器ケア

【補聴器除菌・乾燥機】

ドライキャップ UV2.1 ¥8,800 (税込)

*詳細は47、48ページをご確認ください


*3 TV視聴は別途StreamLine TVが必要 *4 詳しくは47、48ページをご確認ください *5 詳しくは23、24ページをご確認ください。RIC型7/5/3クラスとInsio IXのツインマイク器種(ワイヤレス機能あり)7/5/3クラスは両クラスを搭載。詳しくは29ページをご確認ください *6 Silk Charge&Go IX非対応。Insio IXのシングルマイク器種またはノンワイヤレスを選択した場合非対応 *7 7/5/3クラスは、より進化したライブサウンド *8 Silk Charge&Go IX非対応。Insio IXのシングルマイク器種またはノンワイヤレスを選択した場合非対応 *9 Silk Charge&Go IXは両耳装着用で対応。Insio IXのシングルマイク器種はワイヤレス機能あり(標準)の場合両耳装着用で対応、ノンワイヤレスを選択した場合非対応 *10 シングルマイク器種非対応 *11 7クラスは、反響音抑制機能が自動で働く。5クラスは手動でプログラム切替が必要

補聴器を選ぶ前に
おすす
IX シグニア IX
Signia IX
IX AXN用
充電器
その他
補聴器
アクセサリ
カラーバリエーション
性能一覧

言葉のすみずみまで余さず取り込む



- こんな方におすすめ
- 食事の時のガチャガチャ音や風の音で会話に集中できない
 - テレビの音が大きいと言われる

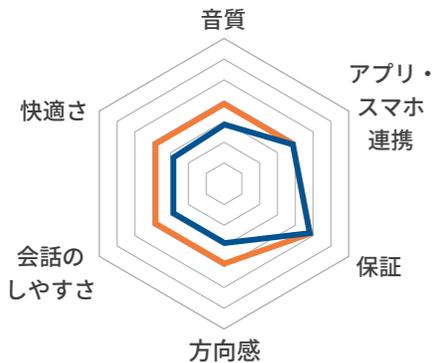

タイプ	充電式 RIC 型		充電式耳あな型	
器種	<p>スタイリッシュ充電式 スタイレット Styiletto IX</p> <p>充電</p>	<p>充電式RIC型 ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go IX</p> <p>充電</p>	<p>充電式既製耳あな型 シルク チャージ&ゴー Silk Charge&Go IX</p> <p>充電</p>	<h3>電池式耳あな型</h3> <h2>Insio IX</h2>
適応聴力	<p>軽 中 高</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB</p>	<p>軽 中 高 重</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:~100dB</p>	<p>軽 中</p> <p>ノーマル: 114/50 ~70dB</p>	<p>軽 中 高</p> <p>ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/60 ~90dB</p>
販売名	補聴器 IXシリーズ		補聴器 Silk IX	補聴器 IXシリーズ カスタム
価格	充電式			電池式
2IX	両耳 ¥474,000*2 片耳 ¥259,000*2			両耳 ¥430,000 片耳 ¥215,000
1IX	両耳 ¥374,000*2 片耳 ¥209,000*2			両耳 ¥330,000 片耳 ¥165,000

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	騒がしい場所での複数人の会話	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋外	屋内・集会所	買い物・リハビリ施設	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	デイサービス・病院	車・電車	超高音質
2IX	24ch	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
1IX	16ch	●	●	●	●	●	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*3 TV視聴は別途StreamLine TVが必要 *4 詳しくは47、48ページをご確認ください *5 詳細は23、24ページをご確認ください。RIC型7/5/3クラスとInsio IXのツインマイク器種(ワイヤレス機能あり)7/5/3クラスは両 *8 シングルマイク器種非対応

機能

- *5 ロックオン
- *8 ダブルプロセッサー
- *7 ライブサウンド
- SENSOR (超広角のみ)
- *6 Bluetooth
- *4 ハンズフリー通話
- *4 Signia app
- *6 Signia Assistant
- TRT (詳しくは40ページをご覧ください)
- コーティング RIC型・耳かけ型
- 既製耳あな型
- 防水・防塵 IP68
- ナノコートで撥水
- 防水・防塵 IP68
- 安心保証 2年修理保証 + スマートリペア (保証期間以降も安心)

詳しくは裏表紙に記載

自分で簡単に補聴器の音を調節

【無料スマートフォンアプリ】

Signia app

【リモコン】

ミニポケット miniPocket ¥22,000 (税込)

テレビや電話の音を楽しむ

【音声ストリーミング用周辺機器】

ストリームラインTV StreamLine TV ¥33,880 (税込)

ストリームラインマイク StreamLine Mic ¥55,000 (税込)

補聴器ケア

【補聴器除菌・乾燥機】

ドライキャップ UV2.1 ¥8,800 (税込)

*詳細は47、48ページをご確認ください 耳着用時に「ワードロックオン」と「スピーチロックオン」両方対応。それ以外の器種/クラスは「ワードロックオン」機能のみ対応 *6 Silk Charge & Go IX, Insio IX非対応 *7 詳しくは29ページをご確認ください

補聴器を選ぶ前に おすすめ Signia IX シグニア IX AX 充電器 IX AX 用 その他 補聴器 アクセサリー! カラーバリエーション 性能一覧



シグニア エーエックス
Signia AX

世界初※、2つの頭脳で言葉と環境音を別々に処理するダブルプロセッサ補聴器

※ 2021年4月、WSオーディオロジグループ調べ




CES 2022イノベーションアワード受賞
本賞は最先端の27の製品分野から、品質、デザイン、ユーザーに提供する価値、独自性と革新性に優れた特に注目すべき製品を表彰する国際的な賞です。




いままで

1つのプロセッサでは言葉と環境音の分別に限界があった。

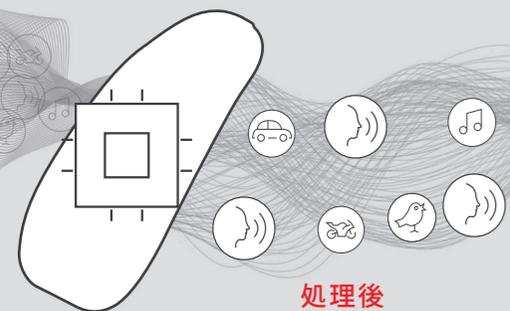

Signia AX

2つのプロセッサが言葉と環境音を別々に処理。賢さ2倍でよりくっきり、すっきり聞こえる。

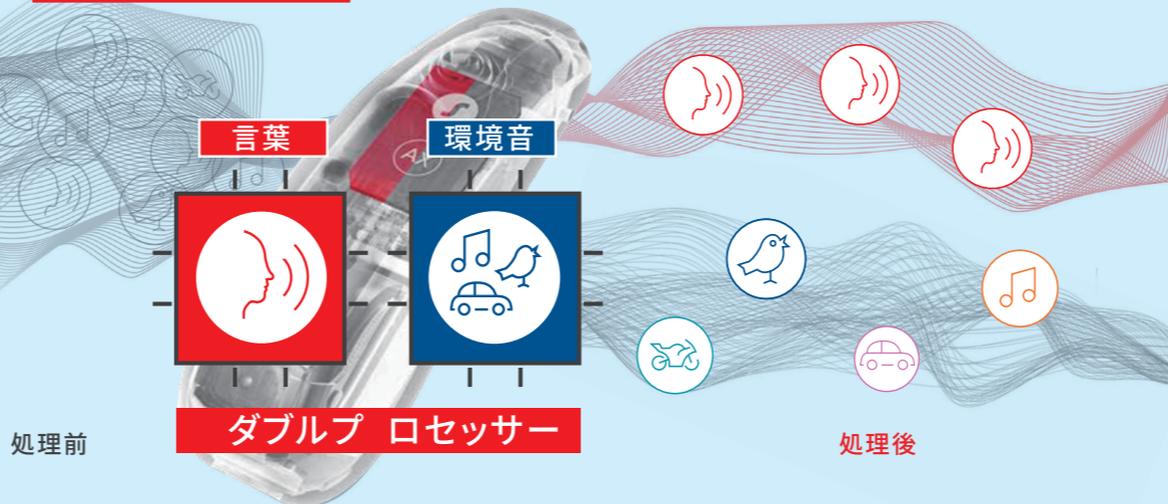

言葉がよりくっきり




環境音がよりすっきり



「ライブサウンド」で、まるで生音
7/5/3クラスはさらに進化したライブサウンド **プラス** に

シグニア音声技術の集大成!様々な革新的な技術がさらに進化して、これまでにない聴覚体験を実現。まるで生音のような、人間の耳に近い明瞭で自然な聞こえをあなたに。

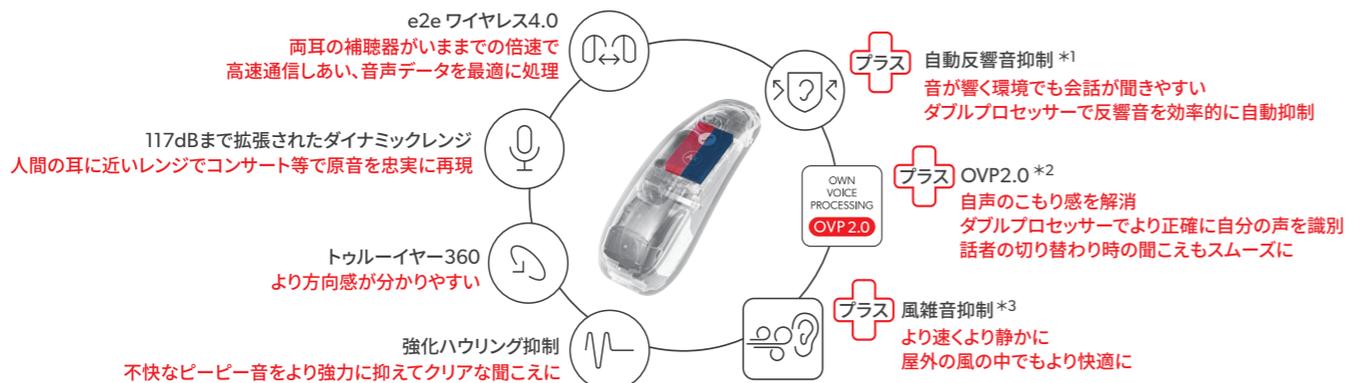

*1 Signia IX、Signia AXシリーズの7クラスは反響音抑制が自動で働く。5クラスは手動でプログラム切替が必要。3クラスは非対応
*2 Signia IX、Signia AXシリーズのRIC型は7/5/3クラスのみOVP2.0対応。耳あな型はOVP機能非対応 *3 Signia IXの全クラス、Signia AXシリーズの7/5/3/2クラスに搭載

優れた機能で補聴器ライフをさらに便利に

- 100シーン自動対応のXセンサー搭載。*4
どこにいても、何をしても最適な音をあなたに。
- スマートフォンを手に持たずに、補聴器をさわるだけで通話可能。*5
- iPhoneもAndroidスマートフォンも、通話・音楽が直接補聴器に届いて聞ける。*5
テレビも自分の音量で楽しめる。

- マスクモード搭載でマスク越しの会話も聞きやすい。スマホアプリでワンクリックONにすればすぐに使える。
- 歩数、活動量、補聴器使用時間、会話レベルをモニタリングする「My WellBeing」対応、よりアクティブで効果的な補聴器使用をサポート。*6
- さらに長い電池持ち時間でいつでも安心。

*4 Signia IXシリーズのRIC型7/5/3クラスと、Signia AXの全機種7/5/3クラスは超広角センサーとモーションセンサー両方搭載、100シーン自動対応。それ以外は超広角センサーのみ搭載、50シーン自動対応。
*5 対応する機種・クラス及びスマートフォンの要件は48ページをご確認ください *6 「My WellBeing」はSignia IX、Signia AXシリーズの7/5/3クラスのBluetooth搭載機種のみ対応。「My WellBeing」の詳細は47ページをご確認ください

補聴器を選ぶ前に
おすす
Signia IX
充電器
Signia AX
その他
アクセサリ
性能一覧
カラーバリエーション

聞きたいことが、より楽に聞こえる



機能

- *5 2x ダブルプロセッサー
- *5 ライブサウンド
- *6 X SENSOR
- OWN VOICE PROCESSING OVP 2.0
- *3*4 Bluetooth
- *4 ハンズフリー通話
- *4 Signia app
- *4 Signia Assistant
- TRT 詳しくは40ページをご覧ください

コーティング RIC型・耳かけ型

- 防水・防塵 IP68
- ナノコートで撥水
- 耳あな型 防水・防塵 IP68

安心保証 7AX/5AX

- 3年 修理保証
- スマートリペア 保証期間以降も安心
- 2年 紛失保証
- 3AX
- 2年 修理保証
- スマートリペア 保証期間以降も安心
- 1年 紛失保証

詳しくは裏表紙に記載

タイプ	充電式 RIC 型	電池式 RIC 型	充電式 耳あな型	
器種	<p>選べる充電器</p> <p>スタイリッシュ充電式 スタイルット Styiletto AX</p> <p>充電</p>	<p>選べる充電器</p> <p>充電式RIC型 ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go AX</p> <p>充電</p>	<p>電池式の定番 ピュア Pure 312 AX</p> <p>312</p>	<p>充電式耳あな型 インシオ チャージ&ゴー Insio Charge&Go AX</p> <p>充電</p>
適応聴力	<p>軽 中 高</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB</p>	<p>軽 中 高 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB</p>	<p>軽 中 高</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB</p>	<p>軽 中 高</p> <p>ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/65 ~90dB</p> <p>軽 中 高</p> <p>パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/65 ~90dB</p>
販売名	補聴器 AXシリーズ			補聴器 AXシリーズ カスタム
価格	充電式		電池式	充電式
7AX	両耳 ¥1,204,000*2	片耳 ¥624,000*2	両耳 ¥1,160,000 片耳 ¥580,000	両耳 ¥1,204,000*2 片耳 ¥624,000*2
5AX	両耳 ¥824,000*2	片耳 ¥434,000*2	両耳 ¥780,000 片耳 ¥390,000	両耳 ¥824,000*2 片耳 ¥434,000*2
3AX	両耳 ¥564,000*2	片耳 ¥304,000*2	両耳 ¥520,000 片耳 ¥260,000	両耳 ¥564,000*2 片耳 ¥304,000*2

*1 HPLレシーバーは別途費用がかかります。詳しくは43ページをご確認ください *2 補聴器本体(非課税) 、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります ※充電器/充電ケースは35、36ページ、カラーは51、52ページをご覧ください ※補聴器は非課税です

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	騒がしい場所での複数人の会話	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋外	屋内・集会所	買い物・リハビリ施設	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	デイサービス・病院	車・電車	超高音質
	チャンネル	Bluetooth	ロックオン	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー 超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	Xセンサー モーションセンサー	OVP	ビーム指向性	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360°	12kHz帯域対応
7AX	48ch	●	—	●	● プラス	●	●	●	●	●	●	●	●	● 自動	●	●
5AX	32ch	●	—	●	● プラス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
3AX	24ch	●	—	●	● プラス	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—

*3 TV視聴は別途StreamLine TVが必要 *4 スマートフォンとの接続について、詳しくは47、48ページをご確認ください *5 7/5/3クラスは、より進化したライブサウンドプラスを搭載。詳しくは29ページをご確認ください *6 Insio Charge&Go AXはOVP機能非対応

自分で簡単に補聴器の音を調節

【無料スマートフォンアプリ】

Signia app

※詳細は47、48ページをご確認ください

テレビや電話の音を楽しむ

【音声ストリーミング用周辺機器】

StreamLine TV ¥33,880 (税込)
StreamLine Mic ¥55,000 (税込)

補聴器ケア

【補聴器除菌・乾燥機】

ドライキャップ UV2.1 ¥8,800 (税込)

補聴器を選ぶ前に
おすす
Signia AX
Signia AX
補聴器
その他
アクセサリ
カラーバリエーション

機能

- 2x: ダブルプロセッサー
- *5: ライブサウンド
- SENSOR: (超広角のみ)
- *3*4: Bluetooth
- *3: テレビ
- *4: Signia app
- *4: Signia Assistant
- TRT: 詳しくは40ページをご覧ください。1AXは非搭載

コーティング RIC型・耳かけ型

- 防水・防塵 IP68
- ナノコートで撥水
- 耳あな型 防水・防塵 IP68

安心保証

- 2年修理保証
- スマートリペア
- 保証期間以降も安心

詳しくは裏表紙に記載

タイプ	充電式 RIC 型	
器種	 <p>選べる充電器</p> <p>ホーパブル充電ケース 4回フル充電できる</p> <p>UV除菌乾燥</p> <p>スタイリッシュ充電式 スタイルット Styletto AX</p> <p>充電</p>	 <p>選べる充電器</p> <p>ホーパブル充電ケース 4回フル充電できる</p> <p>UV除菌乾燥</p> <p>充電式RIC型 ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go AX</p> <p>充電</p>
適応聴力	<p>軽 中 高</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB</p>	<p>軽 中 高 重</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:~100dB</p>
販売名	補聴器 AXシリーズ	
価格	充電式	
2AX	両耳 ¥464,000*2	片耳 ¥254,000*2
1AX	両耳 ¥364,000*2	片耳 ¥204,000*2

タイプ	電池式 RIC 型
器種	 <p>電池式の定番 ピュア Pure 312 AX</p> <p>312</p>
適応聴力	<p>軽 中 高 重</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:~100dB</p>
販売名	補聴器 AXシリーズ
価格	電池式
	両耳 ¥420,000 片耳 ¥210,000
	両耳 ¥320,000 片耳 ¥160,000

タイプ	充電式 耳あな型	
器種	 <p>ワイヤレス充電ITC</p>	 <p>ワイヤレス充電ITE</p>
適応聴力	<p>軽 中 高</p> <p>ノーマル:113/50~70dB パワー:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB</p>	<p>軽 中 高</p> <p>パワー:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB</p>
販売名	補聴器 AXシリーズ カスタム	
価格	充電式	
	両耳 ¥464,000*2	片耳 ¥254,000*2
	両耳 ¥364,000*2	片耳 ¥204,000*2

タイプ	電池式 耳かけ型				
器種	<p>Intuis4はSignia AXと同じ機能を有します。詳しくは40ページをご確認ください。</p>  <p>電池式耳かけ型 インティス Intuis4 M</p> <p>13</p>			 <p>電池式パワータイプ インティス Intuis4 P</p> <p>13</p>	 <p>電池式スーパーパワー インティス Intuis4 SP</p> <p>675</p>
適応聴力	<p>軽 中 高</p> <p>チューブ:~70dB イヤフック:~90dB</p>	<p>中 高 重</p> <p>チューブ:~80dB イヤフック:~100dB</p>	<p>中 高 重</p> <p>イヤフック:~110dB</p>		
販売名	補聴器 Intuis4				
価格	電池式				
Intuis4.2	両耳 ¥420,000	片耳 ¥210,000			
Intuis4.1	両耳 ¥320,000	片耳 ¥160,000			

*1 HPLシーバーは別途費用がかかります。詳しくは43ページをご確認ください *2 補聴器本体(非課税) 充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります *3 充電器/充電ケースは35、36ページ、カラーは51、52ページをご覧ください *補聴器は非課税です

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	騒がしい場所での複数人の会話	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋外	屋内・集会所	買い物・リハビリ施設	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	デイサービス・病院	車・電車	超高音質
	チャンネル	Bluetooth	ロックオン	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー 超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	Xセンサー モーションセンサー	OVP 両耳	ビーム指向性 両耳	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° 両耳	12kHz帯域対応
2AX	16ch	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
1AX	16ch	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*3 TV視聴は別途StreamLine TVが必要 *4 スマートフォンとの接続について、詳しくは47、48ページをご確認ください *5 詳細は29ページをご確認ください

自分で簡単に補聴器の音を調節

【無料スマートフォンアプリ】 Signia app

【リモコン】 ミニポケット miniPocket ¥22,000(税込)

※詳細は47、48ページをご確認ください

テレビや電話の音を楽しむ

【音声ストリーミング用周辺機器】

StreamLine TV ¥33,880(税込)

StreamLine Mic ¥55,000(税込)

補聴器ケア

【補聴器除菌・乾燥機】

ドライキャップ UV2.1 ¥8,800(税込)

補聴器を選ぶ前に
おすす
Signia AX
充電器 Intuis4
その他
アクセサリ
カラーバリエーション

多種多様な充電器で
あなたのスタイルにフィット



充電器の使い方は
シグニア公式YouTube
チャンネルの動画を
ご確認ください



補聴器	<p>スタイルット Styletto IX</p> <p>スタイルット Styletto AX</p>	<p>ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go IX</p> <p>ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go AX</p>	<p>シルク チャージ&ゴー Silk Charge&Go IX</p>	<p>ワイヤレス充電ITC ワイヤレス充電ITE</p> <p>インシオ チャージ&ゴー Insio Charge&Go AX</p>																										
充電器の種類	<p style="text-align: center;">選べる充電器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>持ち運び タイプ</p> <p>Qi規格対応ポータブル充電ケース (幅50mm×奥行30mm×高さ71mm)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>据え置き タイプ</p> <p>ドライ&クリーン充電器 (幅83mm×奥行82mm×高さ88mm)</p> </div> </div>		<p style="text-align: center;">選べる充電器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>持ち運び タイプ</p> <p>ポータブル充電ケース (幅66mm×奥行33mm×高さ76mm)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>据え置き タイプ</p> <p>ドライ&クリーン充電器 (幅83mm × 奥行82mm×高さ88mm)</p> </div> </div>		<p>持ち運び タイプ</p> <p>Qi規格対応ポータブル充電ケース (幅82mm×奥行48mm×高さ29mm)</p>	<p>据え置き タイプ</p> <p>充電器 (幅118mm×奥行79mm×高さ45mm)</p>																								
特徴	<p>Qi規格対応、充電パッドに 置くだけで充電可能</p> <p>蓄電機能付きケースで 外出先でもらくらく充電</p> <p>充電しながら除菌・乾燥</p>		<p>蓄電機能付きケースで 外出先でもらくらく充電</p> <p>充電しながら除菌・乾燥</p>		<p>Qi規格対応、充電パッドに 置くだけで充電可能</p> <p>蓄電機能付きケースで 外出先でもらくらく充電</p>	<p>置くだけ 充電</p> <p>充電器にポンと置くだけで充電開始</p>																								
イヤモード 収納	<p>△ クリックモード(アクリル製)のクリックサイズのみ対応 クリックモード3.0シリコンは非対応</p> <p>○ クリックモード(アクリル製)全サイズ、 クリックモード3.0シリコンに対応</p>		<p>△ クリックモード(アクリル製)のクリックサイズのみ対応 HPモード、クリックモード3.0シリコンは非対応</p> <p>○ クリックモード(アクリル製)全サイズ、HPモード、 クリックモード3.0シリコンに対応</p>		—	—																								
充電・ 使用時間の 目安*1	<p>ポータブル充電ケースへの蓄電</p> <p>USB充電 3時間 ワイヤレス充電 6時間*2</p> <p>充電ケースの蓄電量だけで、 Styletto IXは両耳5回フル充電可能 Styletto AXは両耳4回フル充電可能</p> <p>補聴器の充電</p> <table border="1"> <tr> <td>充電時間</td> <td>30分 スピード充電</td> <td>4時間 フル充電</td> </tr> <tr> <td>使用可能時間</td> <td>IX: 5時間 AX: 5.5時間</td> <td>20時間</td> </tr> </table>		充電時間	30分 スピード充電	4時間 フル充電	使用可能時間	IX: 5時間 AX: 5.5時間	20時間	<p>ポータブル充電ケースへの蓄電</p> <p>USB充電 4時間</p> <p>充電ケースの蓄電量だけで、両耳4回分のフル充電が可能</p> <p>補聴器の充電</p> <table border="1"> <tr> <td>充電時間</td> <td>30分 スピード充電</td> <td>4時間 フル充電</td> </tr> <tr> <td>使用可能時間</td> <td>6時間</td> <td>28時間</td> </tr> </table>		充電時間	30分 スピード充電	4時間 フル充電	使用可能時間	6時間	28時間	<p>ポータブル充電ケースへの蓄電</p> <p>USB充電 4時間 ワイヤレス充電 6時間*2</p> <p>充電ケースの蓄電量だけで、両耳4回分のフル充電が可能</p> <p>補聴器の充電</p> <table border="1"> <tr> <td>充電時間</td> <td>30分 スピード充電</td> <td>4時間 フル充電</td> </tr> <tr> <td>使用可能時間</td> <td>6時間</td> <td>28時間</td> </tr> </table>	充電時間	30分 スピード充電	4時間 フル充電	使用可能時間	6時間	28時間	<p>補聴器の充電</p> <table border="1"> <tr> <td>充電時間</td> <td>30分 スピード充電</td> <td>4時間 フル充電</td> </tr> <tr> <td>使用可能時間</td> <td>6時間</td> <td>28時間</td> </tr> </table>	充電時間	30分 スピード充電	4時間 フル充電	使用可能時間	6時間	28時間
充電時間	30分 スピード充電	4時間 フル充電																												
使用可能時間	IX: 5時間 AX: 5.5時間	20時間																												
充電時間	30分 スピード充電	4時間 フル充電																												
使用可能時間	6時間	28時間																												
充電時間	30分 スピード充電	4時間 フル充電																												
使用可能時間	6時間	28時間																												
充電時間	30分 スピード充電	4時間 フル充電																												
使用可能時間	6時間	28時間																												

*1 Bluetooth機能を利用して音楽等を聞く場合(ストリーミング)、使用可能時間はより短くなります
*2 市販のQi規格対応の充電パッドをご使用ください。充電パッドをご使用の場合、ケースの充電時間の目安は6時間ですが、ご使用の充電パッドの種類により異なる場合があります

※故障や事故を避けるため、充電する際には必ず当社提供の純正充電器・ケーブル・アダプターをご使用ください

補聴器を運ぶ前に
おすす
IX
Signia IX
Signia AX
IX AX用
充電器
その他
アクセサリ
性能一覧
カラーバリエーション



充電式 耳かけ型 ※カラーは52ページをご覧ください

電池式 耳あな型




2025年9月末
販売終了予定



充電式耳かけ型	充電式パワータイプ	充電式スーパーパワー	既製耳あな型
Motion Charge&Go X	Motion Charge&Go P X	Motion Charge&Go SP X	Silk X
充電	充電	充電	10A
適応聴力 チューブ：~70dB イヤフック：~90dB	適応聴力 チューブ：~80dB イヤフック：~100dB	適応聴力 イヤフック：~110dB	適応聴力 ノーマル：114/50 ~70dB
クラス			
7X	両耳 ¥1,064,000*2 片耳 ¥554,000*2	両耳 ¥1,020,000 片耳 ¥510,000	両耳 ¥1,020,000 片耳 ¥510,000
5X	両耳 ¥764,000*2 片耳 ¥404,000*2	両耳 ¥720,000 片耳 ¥360,000	両耳 ¥720,000 片耳 ¥360,000
3X	両耳 ¥544,000*2 片耳 ¥294,000*2	両耳 ¥500,000 片耳 ¥250,000	両耳 ¥500,000 片耳 ¥250,000
2X	両耳 ¥444,000*2 片耳 ¥244,000*2	両耳 ¥400,000 片耳 ¥200,000	両耳 ¥400,000 片耳 ¥200,000
1X	両耳 ¥304,000*2 片耳 ¥174,000*2	両耳 ¥260,000 片耳 ¥130,000	両耳 ¥260,000 片耳 ¥130,000
販売名 補聴器 Xシリーズ		販売名 補聴器 Silk X	

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	騒がしい場所での複数人の会話	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋外	屋内・集会所	買い物・リハビリ施設	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	デイサービス・病院	車・電車	超高音質
チャンネル	Bluetooth	ロックオン	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー 超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	Xセンサー モーションセンサー	OVP (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応	
7X	48ch	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5X	32ch	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	
3X	24ch	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	
2X	16ch	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
1X	16ch	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

*1 Bluetooth搭載機種のみ対応。TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。iPhoneは直接音声をストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは別途StreamLine Micが必要になります
*2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります *3 Motion Charge&Go SP Xの7クラスは34ch *4 Silk Xは非対応
*5 Silk Xは両耳装着で対応 *6 Motion Charge&Go SP Xの7クラスは非対応

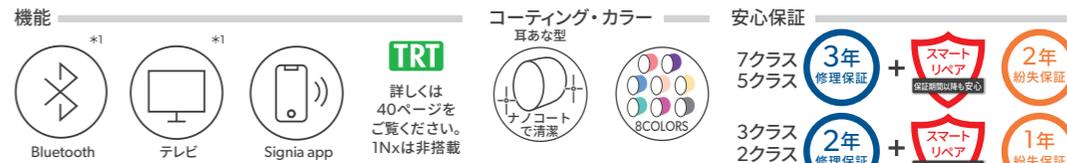

電池式 耳あな型 ※カラーは52ページ、オプションは55、56ページをご確認ください

インシオ
Insio



最小 アイアイシー IIC	小型 シーアイシー CIC	スタイリッシュ耳あな型 クール COOL	耳あな型の定番 アイティーシー ITC	耳あな型の定番 アイティーシー ツイン ITC TWIN	大きめで耳に収まる アイティーイー ツイン ITE TWIN
10A	10A	312	312	312	312
適応聴力 ノーマル：113/50 ~70dB	適応聴力 ノーマル：113/50 ~70dB パワー：118/55 ~80dB ハイパワー：124/65 ~90dB	適応聴力 ノーマル：113/50 ~70dB パワー：118/55 ~80dB	適応聴力 ノーマル：113/50 ~70dB パワー：118/55 ~80dB ハイパワー：124/65 ~90dB	適応聴力 ノーマル：113/50 ~70dB パワー：118/55 ~80dB ハイパワー：124/65 ~90dB	適応聴力 パワー：118/55 ~80dB ハイパワー：124/65 ~90dB
クラス					
7Nx	両耳 ¥1,020,000 片耳 ¥510,000	両耳 ¥1,020,000 片耳 ¥510,000	両耳 ¥1,020,000 片耳 ¥510,000	両耳 ¥1,020,000 片耳 ¥510,000	両耳 ¥1,020,000 片耳 ¥510,000
5Nx	両耳 ¥580,000 片耳 ¥290,000	両耳 ¥580,000 片耳 ¥290,000	両耳 ¥580,000 片耳 ¥290,000	両耳 ¥580,000 片耳 ¥290,000	両耳 ¥580,000 片耳 ¥290,000
3Nx	両耳 ¥440,000 片耳 ¥220,000	両耳 ¥440,000 片耳 ¥220,000	両耳 ¥440,000 片耳 ¥220,000	両耳 ¥440,000 片耳 ¥220,000	両耳 ¥440,000 片耳 ¥220,000
2Nx	両耳 ¥360,000 片耳 ¥180,000	両耳 ¥360,000 片耳 ¥180,000	両耳 ¥360,000 片耳 ¥180,000	両耳 ¥360,000 片耳 ¥180,000	両耳 ¥360,000 片耳 ¥180,000
1Nx	両耳 ¥240,000 片耳 ¥120,000	両耳 ¥240,000 片耳 ¥120,000	両耳 ¥240,000 片耳 ¥120,000	両耳 ¥240,000 片耳 ¥120,000	両耳 ¥240,000 片耳 ¥120,000
販売名 補聴器 Nxシリーズ			販売名 補聴器 Nxシリーズ カスタム		

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	騒がしい場所での複数人の会話	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋外	屋内・集会所	買い物・リハビリ施設	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	デイサービス・病院	車・電車	超高音質
チャンネル	Bluetooth	ロックオン	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー 超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	Xセンサー モーションセンサー	OVP (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応	
7Nx	48ch	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5Nx	32ch	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	
3Nx	24ch	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	
2Nx	16ch	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
1Nx	16ch	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

*1 Bluetooth搭載機種のみ対応。TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。iPhoneは直接音声をストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは別途StreamLine Micが必要
*2 ITC TWIN, ITE TWINに対応 *3 ITC TWIN, ITE TWINに対応。IIC, CIC, COOL, ITCは両耳装着で対応 *4 補聴器は非課税です

プライマックス
primax

機能

- Signia app
- TRT: 詳しくは40ページをご覧ください。1pxは非搭載
- コーティング・カラー: 耳かけ型 (防水・防塵 IP67, ナノコートで撥水), 耳あな型 (防水・防塵 IP57, ナノコートで清潔, 2COLORS)
- 安心保証: 2年修理保証 + スマートリペア (保証期間以降も安心) + 1年紛失保証

7px、5pxのみ
詳しくは裏表紙に記載

インテイス
Intuis4 AX *1

機能

- 2x: ダブルプロセッサー
- ライブサウンド
- SENSOR (超広角のみ)
- Bluetooth
- テレビ
- Signia app
- TRT: 詳しくはページ右下をご覧ください。Intuis4.2のみ搭載
- コーティング: RIC型・耳かけ型 (防水・防塵 IP68, ナノコートで撥水)
- 安心保証: 2年修理保証 + スマートリペア (保証期間以降も安心)

※詳しくは裏表紙に記載

電池式 耳かけ型 ※カラーは52ページをご覧ください

2025年9月末販売終了予定

スーパーパワー
モーション
Motion SP

675

適応聴力	中 高 重 イヤフック: ~110dB
クラス	価格
7px	両耳 ¥980,000 片耳 ¥490,000
5px	両耳 ¥580,000 片耳 ¥290,000
3px	両耳 ¥400,000 片耳 ¥200,000
2px	両耳 ¥320,000 片耳 ¥160,000
1px	両耳 ¥240,000 片耳 ¥120,000
販売名	補聴器 primaxシリーズ

電池式 耳あな型 ※カラーは52ページ、オプションは55、56ページをご確認ください

インシオ
Insio

小型 シーアイシー CIC / CIC 312
幅広い聴力に対応 エムシー MC / MC 312
スタイリッシュ耳あな型 クール COOL / COOL 13
耳あな型の定番 アイティーシー ITC / ITC TWIN
大きめ・電池長持ち アイティーイー ITE / ITE TWIN

適応聴力	軽 中 高 ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/65 ~90dB	軽 中 高 ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/65 ~90dB	軽 中 高 ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/65 ~90dB	軽 中 高 ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/65 ~90dB	軽 中 高 ノーマル: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/65 ~90dB
クラス	価格				
7px	両耳 ¥1,020,000 片耳 ¥510,000				
5px	両耳 ¥620,000 片耳 ¥310,000				
3px	両耳 ¥440,000 片耳 ¥220,000				
2px	両耳 ¥360,000 片耳 ¥180,000				
1px	両耳 ¥280,000 片耳 ¥140,000				
販売名	補聴器 primaxシリーズ カスタム				

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	騒がしい場所での複数人の会話	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋外	屋内・集会所	買い物・リハビリ施設	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	デイサービス・病院	車・電車	超高音質
チャンネル	Bluetooth	ロックオン	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー 超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	Xセンサー モニタリングセンサー	OVP (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワー*3 エンハンス	スピーチフォーカス*4	スピーチフォーカス*2	12kHz帯域対応*5		
7px	48ch*	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●
5px	32ch*	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—
3px	24ch	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2px	16ch	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1px	16ch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 Motion SPは7/5クラスとも24ch *2 耳あな型は、ITC TWIN、ITE TWINに対応 *3 耳あな型はMC/MC 312(7クラス両耳装用)、ITC TWIN、ITE TWINに対応 *4 シングルマイク機種には非搭載 *5 Motion SPを除く *6 COOL 13はパワーのみ対応

電池式 耳かけ型

電池式耳かけ型
インテイス Intuis4 M 13

電池式パワータイプ
インテイス Intuis4 P 13

電池式スーパーパワー
インテイス Intuis4 SP 675

カラーバリエーション
ベージュ ブラック
グラファイト サンディブラウン
※写真はIntuis4 Mです。ご購入後のカラー変更は¥9,000(非課税)で可能です

適応聴力	軽 中 高 チューブ: ~70dB イヤフック: ~90dB	中 高 重 チューブ: ~80dB イヤフック: ~100dB	中 高 重 イヤフック: ~110dB
クラス	価格		
Intuis4.2	両耳 ¥420,000 片耳 ¥210,000		
Intuis4.1	両耳 ¥320,000 片耳 ¥160,000		
Intuis4.0	両耳 ¥220,000 片耳 ¥110,000		
販売名	補聴器 Intuis4		

アプリ/対応リモコン
[スマートフォン対応アプリ] [リモコン]
Signia app
miniPocket

※詳しくは47、48ページをご覧ください

TRT IX Signia IX シグニア IX、Signia AX、Signia Xperience、Signia Nx

マークが目印です

primax、Intuis4は耳鳴り治療器機能を搭載

※各シリーズの1クラスはTRT機能非搭載、Intuis4は4.2のみTRT機能搭載

8割の方に効果があったと報告されている*3TRT(耳鳴り再訓練法)用の治療音(音響的ノイズ)を発生させることができます。

※耳鳴りの治療及び本機能の使用については、必ず先に耳鼻科専門医にご相談ください。
※TRT: Tinnitus Retraining Therapy
*3 関谷芳正、松田太志、高橋真理子他、耳鳴りに対する新しい治療法・TRT(療法)耳鼻臨床95:6;639~646、2002

搭載機能	きめ細かい聞こえ	グループ活動	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	テレビ・スマホ	屋外	屋内・集会所
チャンネル	Xセンサー 超広角センサー	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Bluetooth	風雑音抑制	突発音抑制	
Intuis4.2	16ch	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★
Intuis4.1	16ch	★★	★★	★★	★★★★	—	—
Intuis4.0	12ch	★	★	★	—	—	—
Intuis3	12ch	—	—	—	—	—	—

*1 Intuis 4.2/4.1は Signia AXシリーズ 2AX/1AXと同じ性能・機能を有しています *2 Intuis4.2/4.1のみBluetooth搭載。Bluetooth搭載器種のTV視聴は別途StreamLine TVが必要。スマートフォンとの接続について、詳しくは47、48ページをご確認ください

Intuis3



機能 ———— 安心保証

Signia app **2年修理保証** + **スマートリペア**
※詳しくは裏表紙に記載

コーティング・カラー

防水・防塵 IP67 ナノコートで撥水 (P・SP除く)

製品名	適応聴力	チャンネル数	価格	電池	アプリ/対応リモコン
RIC型	軽 中 高 重 S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP*:~100dB	12ch	両耳 ¥180,000 片耳 ¥90,000	312	[スマートフォン対応アプリ] Singnia アプリ Signia app
ミニ耳かけ型S	軽 中 チューブ: ~50dB イヤフック: ~65dB				
耳かけ型M	軽 中 高 チューブ: ~65dB イヤフック: ~85dB				
耳かけ型P	中 高 重 イヤフック: ~100dB				
耳かけ型SP	中 高 重 イヤフック: ~110dB				
販売名	補聴器 Intuis3				

*HPLレシーバーは別途費用がかかります



機能 ———— コーティング・カラー ———— 安心保証

Signia app **2年修理保証** + **スマートリペア**
※詳しくは裏表紙に記載

ナノコートで清潔 8COLORS

※カラーは52ページ、オプションは55、56ページをご確認ください。

形状	適応聴力	チャンネル数	価格	電池	アプリ/対応リモコン
CIC	軽 中 ノーマル:113/50~70dB	12ch	両耳 ¥220,000 片耳 ¥110,000	10A	[スマートフォン対応アプリ] Singnia アプリ Signia app
CIC 312				312	
MC	軽 中 高 ノーマル:113/50~70dB パワー:118/55~80dB			10A	
MC 312	ハイパワー:124/65~90dB			312	
ITE	軽 中 高 パワー:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB			13	
販売名	補聴器 Intuis3 カスタム				

※耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご指定のオプションが取り付けられない場合があります
※オプションを複数取り付けた場合、形状が大きくなる場合があります

Prompt / Fun



Prompt 基本性能を備えた補聴器

機能 ———— コーティング・カラー ———— 安心保証

Signia app **2年修理保証** + **スマートリペア**
※詳しくは裏表紙に記載

Lifeチューブ (Sのみ) (別売) ツインマイク
● プッシュボタン ● ボリューム付 (MPのみ)

製品名	適応聴力	チャンネル数	価格	電池
S	軽 中 チューブ: ~50dB イヤフック: ~65dB	8ch	両耳 ¥100,000 片耳 ¥50,000	312
MP	中 高 重 ~100dB			13
販売名	補聴器 Prompt			

*Prompt MPの本体刻印はPrompt Pです *miniPocketとSignia app対応

Fun 簡易デジタル補聴器



機能 ———— コーティング・カラー ———— 安心保証

Signia app **2年修理保証** + **スマートリペア**
※詳しくは裏表紙に記載

● ボリューム付 ● 4つのプリセットプログラム
● ピーピーしにくい

製品名	適応聴力	チャンネル数	価格	電池
P	中 高 ~90dB	6ch	片耳 ¥98,000	13
SP	高 重 ~110dB			675
販売名	補聴器 Fun			

*リモコンは非対応、プログラムは固定

※補聴器は非課税です

カラーバリエーション

Intuis3	ページ	グレー	ブラック	シルバー	ダークグラナイト	ディープブラウン
Intuis3 RIC						
Intuis3 S		*1	*1	*1		*1
Intuis3 M						
Intuis3 P						
Intuis3 SP						

RIC、P、SPはご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)で可能です
*1 ダークグラナイトとの2トーンカラーとなります

Prompt	ページ	グレー	ブラウン	ディープブラウン
Prompt S		*1	*1	
Prompt MP				
販売名	補聴器 Prompt			

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)で可能です

※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に

おすす

Signia

Signia

充電器

補聴器

アクセサリ

カラーバリエーション

アクセサリ・補修パーツ

RIC型・耳かけ型用

RIC型・耳かけ型は、レシーバーや耳せんの選択で適応聴力が変わります。あなたの聴力に合わせて最適なアクセサリを選びましょう。

RIC型用

ミニレシーバー使用の場合



Signia IX, Signia AXシリーズ用		
1	3.0 ミニレシーバー	¥12,650 (1本 S/M/P)
2	ワックスガード3.0 ナノケア	¥1,210 (8個入り)
3	イヤチップ3.0/スリーブ3.0	¥2,420 (同サイズ6個入り)
4	クリックモールド3.0	¥10,500 (非課税) (1個)
5	ワックスガード3.0 ナノケア	¥1,210 (8個入り)

上記シリーズ以外		
1	2.0 ミニレシーバー	¥12,650 (1本 S/M/P)
2	ミニレシーバー用ワックスガード2	¥1,760 (8個入り)
3	クリックスリーブ2.0/クリックドーム	¥2,420 (同サイズ6個入り)
4	クリックモールド2.0	¥10,500 (非課税) (1個)
5	クイックガード	¥1,210 (8個入り)

HPモールド(高～重度難聴向け)使用の場合



Signia IX, Signia AXシリーズ用		
1	HPモールド3	¥27,000 (非課税) *1
2	セルストップ WG3.0 XL	¥550 (8個入り)

上記シリーズ以外		
1	HPモールド2	¥27,000 (非課税) *1
2	クイックガード	¥1,210 (8個入り)

2 モールド用耳あかプロテクター

*1 補聴器と同時注文時のみ¥15,000(非課税) *2 補聴器の機種やアクセサリの種類によって価格・数量が異なります。詳しくは販売店にご確認ください

耳かけ型用

イヤフック使用の場合



1	イヤフック(各種)	¥550	(1本)
2	サウンドチューブ	¥440~¥550*2	(1m)
3	エルボー	¥165	(1個)
4	イヤチップ	¥220~¥330*2	(1個)
5	イヤフック用モールド	¥9,500 (非課税)	(1個)

Thinチューブ(Lifeチューブ)使用の場合



Motion Xシリーズ、Intuis4シリーズ用			
1	Thinチューブ3.0	¥1,100	(左右各1本入り)
2	ワックスガード3.0 ナノケア	¥1,210	(8個入り)
3	イヤチップ3.0/スリーブ3.0	¥2,420	(同サイズ6個入り)
4	Thinチューブ3.0用モールド	¥10,500 (非課税)	(1個)
5	ワックスガード3.0 ナノケア	¥1,210	(8個入り)

上記以外の耳かけ型			
1	Lifeチューブ	¥1,650~¥3,300*2	
3	Lifeチップ	¥2,420	(同サイズ10個入り)

アクセサリ・補修パーツ

耳あな型用

既製耳あな型用



Signia IXシリーズ用

1	ワックスガード 3.0 ナノケア	¥1,210	(8個入り)
2	スリーブ3.0	¥2,420	(同サイズ6個入り)
	イヤチップ3.0	¥2,420	(同サイズ6個入り)

Signia Xperienceシリーズ用

1	ミニレシーバー用ワックスガード2	¥1,760	(8個入り)
2	ミニレシーバー用クリックスリーブ2.0	¥2,420	(同サイズ6個入り)
	ミニレシーバー用クリックドーム	¥2,420	(同サイズ6個入り)

オーダーメイド耳あな型用



Signia IXシリーズ用

IIC	CIC	ITC	ITC TWIN	ITE TWIN
1	クイックガード	¥1,210	(8個入り/交換ツール入り)	

上記以外のオーダーメイド耳あな型

Insio Charge&Go AX				
Insio Nx/px				
1	クイックガード	¥1,210	(8個入り/交換ツール入り)	
クリネットダイヤルパック ¥2,200 (16個入り交換ツール入り)				

*アクセサリの価格は非課税と記載しているもの以外はすべて税込価格です

補聴器を選ぶ前に
お好みの
補聴器
Signia IX
Signia AX
IX AX用
充電器
その他
補聴器
アクセサリ・
アプリ等
カラーバリエーション
性能一覧

RIC型・耳かけ型用 イヤモールド

装着イメージ



クリック/カナル

COOL

スタンダード
(クリックモールド+レシーバー)

スタンダード
(イヤモールド+イヤフック)

イヤモールド

一人ひとりの耳の形に合わせて作るオーダーメイドの耳せん

- 聞こえに適した音質に調整が可能。
- 音漏れによるハウリング(ピーピー音)を防ぐ。
- 補聴器の脱落を防止し、安定した装着が可能。

名称	RIC型用		耳かけ型用				適応聴力	特徴
	3.0ミレシーバー用 2.0ミレシーバー用	3.0ミレシーバー用 (IX, AXのみ対応)	Thinチューブ3.0用	イヤフック用				
素材	クリックモールド※	クリックモールド 3.0シリコン	Thinチューブ3.0 モールド	硬質アクリル	軟質アクリル	ポップフィット		
色	クリア	クリア	クリア	クリア	クリア	17色		
形状	クリック/カナル	クリック	クリック	カナル	カナル	カナル	軽 中	最小サイズ、外から見える部分が少ない
カナルロック		—			—	—	軽 中	クリック/カナルにストッパーが付いたもの クリック/カナルでは外れやすい人向け
COOL		—			—	—	軽 中	当社オリジナルのつけ心地重視 モデル
ハーフシェル		—					軽 中	外から見える部分をなるべく小さくし、 薄く削ったもの(旧カナルサイズ)
スケルトン		—			—	—	軽 中 高	安定感に目立たなさをプラス
スタンダード		—					軽 中 高 重	安定感重視でハウリングしにくく、 高度以上の方に標準の形状
イヤモールド本体	¥10,500 (非課税)			¥9,500 (非課税)				
テグス加工料金	テグス標準装備 追加料金なし	テグス非対応	テグス標準装備 追加料金なし	¥1,000 (非課税)		テグス非対応		

● RIC型用クリックモールド※
Thinチューブ3.0モールド
(クリアのみ)

● クリックモールド3.0シリコン
(クリアのみ)

● イヤフック用アクリル製
イヤモールド (クリアのみ)



● イヤフック用ポップフィット (17色)



※ クリックモールドはレシーバーの世代によって形状が異なり、互換性ありません

ケアソリューション

補聴器は、毎日身につける体の一部だから、お手入れもしっかりと。

UV除菌・乾燥機

ドライキャップ UV2.1

充電器ごとに入れて充電しながら除菌・乾燥できる!

¥8,800 (税込)

※写真は充電式補聴器Stylettoを入れて充電しながら乾燥しているイメージ

対流エアフロー採用でしっかり乾燥。充電器ごとに入れて充電しながら乾燥・除菌ができる。様々なUV除菌可能な小物にも使える特大サイズ。本体サイズ: W127×H115×D127mm

2種類の運転モードから選択可能

夜寝る前に...

ドライ&クリーンモード

運転時間120分 (内4分UV除菌)

ちょっとした時間に...

クリーンモード

運転時間2分

パーフェクトドライ ラックス

¥9,900 (税込)

特殊製法の四角形状UVランプが全方向から紫外線を照射し、補聴器をしっかり除菌。ヒーター採用、30分間温風で急速乾燥。本体サイズ: W93×H48×D76mm

2種類の運転モードから選択可能

37°C

99% UV除菌

運転時間30分 (内5分UV除菌)

その他のお手入れ用品

補聴器乾燥カップ
シリカゲル入
しっかり乾燥!
乾燥用の密閉式カップ。
(大サイズ乾燥剤 1個付)



¥990 (税込) 1個

詰め替え用
乾燥シリカゲル
補聴器用大サイズ乾燥剤 (個包装)。
補聴器乾燥カップ (別売) に入れて使用。



¥1,100 (税込) 2個入り

クリーニングシート
アルコール除菌で毎日きれいに。
個包装だから外出時にも便利。



¥990 (税込) 30枚入り、個包装

スターターセット
初めてご利用の方に!
旅行にも便利。



[セット内容]

1. クリーニングシート 5枚
2. 補聴器乾燥カップ 1個
3. 乾燥シリカゲル(サイズ:小) 2個
4. 掃除用ブラシ 2種類 各1本

¥2,200 (税込)

アプリ・リモコン・周辺機器



スマートフォン用アプリ Signia app

無料のスマートフォンアプリで、補聴器の音量上げ下げがずっと簡単に。先端技術と豊富な機能で、補聴器のある生活がもっと便利に。

Signia appとお使いのスマートフォン等との接続可否はこちら



らくらく音リモコン

ほとんどのシグニア補聴器*は、高周波数の音で補聴器をコントロールできます。補聴器の音量・音質調節や電池残量確認、プログラム変更等が可能です。



*Funを除く本カタログ記載のすべての機種対応

Signia appのインストール方法

- ①お使いのスマートフォンでApp Store/Playストアを開く
- ②検索ウィンドウに「シグニア」(または「signia」)と入力
- ③アプリをインストール

Available on the iPhone

ANDROID APP ON Google play

ご注意

必要なOSバージョンやスマートフォンの要件は各ストアのアプリインストールページの説明をご確認ください

※端末・OS要件を満たしていても、組み合わせによっては本アプリが正常に動作しない場合があります

※特にAndroid端末に関しては、端末の種類やOSバージョンなどによっては本アプリが正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください

※アプリの機能、画面デザインは予告なく変更されることがあります。新しい機能が追加されることがありますので、アプリを定期的にアップデートしてください


Bluetooth 搭載機種なら、さらに使える機能がいっぱい

※各機能の対応補聴器シリーズは右の表をご確認ください

●**マスクモード***1
ワンタップでマスク越しの声がより聞きやすく。

●**Signia Assistant***1 *2
Signia app内の人工知能搭載の補聴器使用支援システム。Signia Assistantの質問に何度か答えることであなたに最適な調節に。


●**My WellBeing**
補聴器内蔵のモーションセンサーが体の動きを検知、Signia app内に活動量として表示。補聴器とSignia appをより積極的に使うことで、あなたの健康増進・QOL(生活の質)向上の一助となる機能。

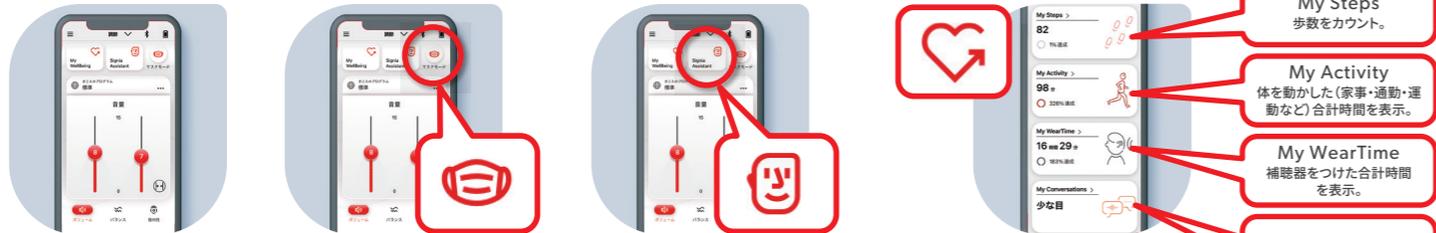

*1 CROS/BiCROSシステムを使用する場合、マスクモードとSignia Assistantは利用不可
*2 Signia Assistantを使い始めるには、補聴器販売店で機能をONにする必要があります。補聴器を購入した販売店にご相談ください。
定期的には販売店で聴力に合わせて補聴器を調整することをお勧めします
*3 My Conversationsは両耳装着でOVP機能を有効にした場合のみ使用可能。OVP機能を利用できない耳あな型とCROSは非対応

リモコン・周辺機器

- ミニポケット miniPocket ¥22,000 (税込)
- ストリームラインマイク StreamLine Mic ¥55,000 (税込)
- ストリームラインTV StreamLine TV ¥33,880 (税込)
- スマートリモート Smart Remote ¥22,000 (税込)

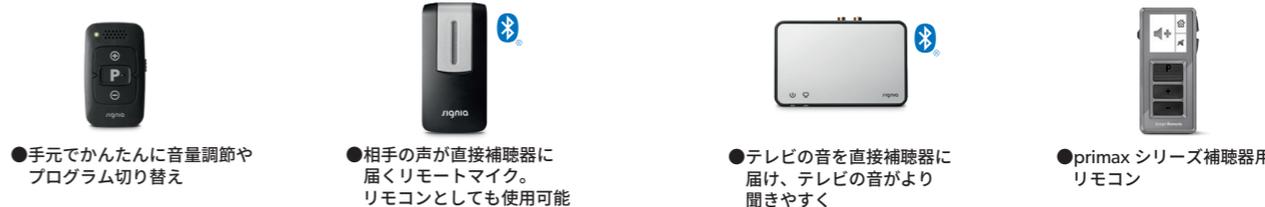

- 手元でかんたんに音量調節やプログラム切り替え
- 相手の声が直接補聴器に届くリモートマイク。リモコンとしても使用可能
- テレビの音を直接補聴器に届け、テレビの音がより聞きやすく
- primax シリーズ補聴器用のリモコン

各シリーズのアプリ・リモコン等の対応状況

Bluetooth搭載有無	シリーズ	Signia app	マスクモード	Signia Assistant	My WellBeing	ミニポケット	スマートリモート	ストリームラインマイク	ストリームラインTV
Bluetooth 搭載機種	IX Signia IX シグニアIX Signia AX	●	●	●	● 7/5/3クラスのみ対応	●	—	●	●
	Signia Xperience	●	●	●	—	●	—	●	●
	Signia Nx	●	—	—	—	●	—	●	●
Bluetooth 非搭載機種	Intuis4.2/Intuis4.1	●	●	●	—	●	—	●	●
	primax	●	—	—	—	●	●	—	—

ご注意 心臓ペースメーカーを使用している方は、リモコンを使用しないでください。スマートフォン専用アプリをご使用の場合、スマートフォンとの距離はスマートフォンの取扱説明書に従ってください

各シリーズのスマートフォンとの連携機能

- ダイレクトストリーミング：スマートフォン等端末の通話音声や動画・音楽の再生音を補聴器に直接ストリーミングして聞くことができる
- ハンズフリー通話：相手の声は補聴器から聞こえ、あなたの声は補聴器マイクが拾うことで、スマートフォンを手持たず通話可能
- コールコントロール：補聴器をタップする / ボタンを押すといった操作で、スマートフォンに触らずに電話に出る / 切ることができる

Bluetooth搭載有無	シリーズ	Androidスマートフォン							
		iPhone (iPhone 11以上かつiOS 15.2以上)		Bluetooth LE Audio対応		ASHA対応かつAndroid OS 11以上		その他	
Bluetooth 搭載機種	IX Signia IX シグニアIX	●	●	●	●	●	—	●	—
	Signia AX	●	●	●	●	●	—	●	—
	Signia Xperience Signia Nx	●	—	●	—	●	—	●	—
Bluetooth 非搭載機種	Intuis4.1/Intuis4.2	●	—	●	—	●	—	●	—
	全シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—

※Android端末は多様な種類があり、Bluetooth LE Audio /ASHA対応であっても、端末のメーカーが定める仕様や搭載OSバージョンにより、表に記載している補聴器との連携機能を利用できない場合があります。お使いのスマートフォンとの接続はこちらも併せてご確認ください




補聴器を運ぶ前に
おすす
IX シグニアIX
Signia AX
IX AX用
充電器
その他
アクセサリ
アプリ等
カラーバリエーション
性能一覧

クロス バイクロス
CROS・BiCROS
補聴システム


CROS・BiCROS システムの仕組み

CROS・BiCROSシステムは一側性難聴の方をサポート。
聞き取りができない耳にCROSを装着すると、聞こえる耳に装着した補聴器で左右両側の音を聞くことが可能。

CROS送信器なし

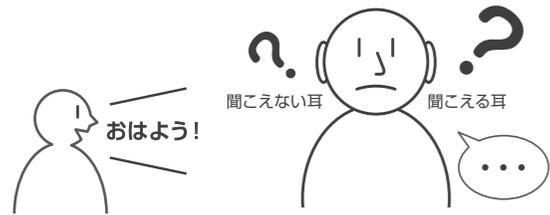


CROS送信器あり

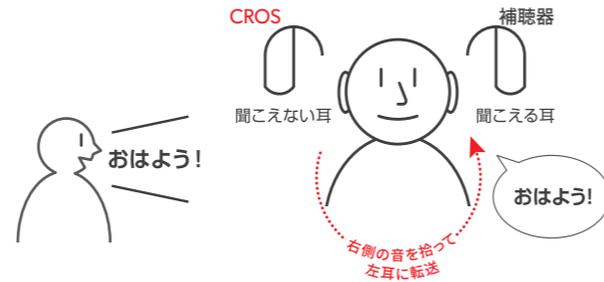

CROS

片耳がほぼ健聴の場合

補聴器からはCROS送信器から転送された音が聞こえ、同時に耳せんを通して外界の音も聞こえる。

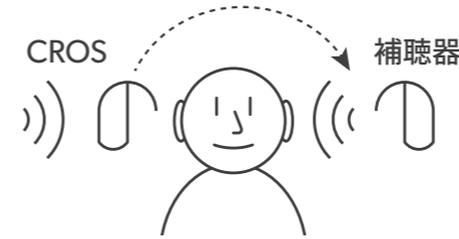


※CROS・BiCROSシステムを使用する場合、マスクモードとSignia Assistantは利用不可

BiCROS

良い方の耳にも難聴がある場合

補聴器はCROS送信器から転送された音と外界の音をミックスし、増幅して届ける。

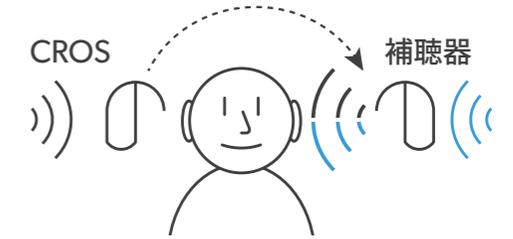

器種	IX Signia IX シグニアIX	Signia AX	Signia Xperience
<p>防水・防塵 IP68</p> <p>選べる充電器</p> <p>対象器種: Pure Charge&Go IX</p> <p>対応クラス: 7IX 5IX 3IX 2IX 1IX</p> <p>ドライ&クリーン充電器</p>	<p>防水・防塵 IP68</p> <p>選べる充電器</p> <p>対象器種: Pure Charge&Go AX Pure 312 AX Insio Charge&Go AX Intuis4</p> <p>対応クラス: 7AX 5AX 3AX 2AX 1AX</p> <p>Intuis4.2 Intuis4.1</p> <p>Intuis4.0はCROS非対応</p> <p>ドライ&クリーン充電器</p>	<p>防水・防塵 IP68</p> <p>対象器種: Pure Charge&Go AX Pure 312 AX Insio Charge&Go AX Intuis4</p> <p>対応クラス: 7AX 5AX 3AX 2AX 1AX</p> <p>Intuis4.2 Intuis4.1</p> <p>Intuis4.0はCROS非対応</p>	<p>防水・防塵 IP68</p> <p>対象器種: Motion Charge&Go X Motion Charge&Go P X Motion Charge&Go SP X Pure Charge&Go X</p> <p>販売終了 Pure 312 X</p> <p>対応クラス: 7X 5X 3X</p>
販売名	CROS Pure Charge&Go IX	CROS Pure Charge&Go AX	CROS Pure Charge&Go X
価格(税込)	¥110,000 ^{*1} (充電器を除く)	¥110,000 ^{*1} (充電器を除く)	¥110,000 ^{*1} (充電器を除く)
使用電池 電池寿命(連続使用)	充電 約28時間	充電 約28時間	充電 約23時間
カラーバリエーション ^{*2}	<p>ベージュ ブラック パールホワイト サンディブラウン ダークシャンパン ディープブラウン ローズゴールド シルバーヒーロー グラファイト ファインゴールド</p>	<p>ベージュ ブラック パールホワイト サンディブラウン ダークシャンパン ディープブラウン ローズゴールド シルバーヒーロー グラファイト ファインゴールド</p>	<p>ベージュ グラナイト グレー ブラック パールホワイト サンディブラウン ダークシャンパン ディープブラウン ローズゴールド シルバーヒーロー</p>

*1 別売の充電器¥44,000(課税・税込)が必要です *2 ご購入後のカラー変更は¥9,900(税込)で可能です ※CROS各器種の保証期間は1年です

※写真はCROS Pure Charge&Go IXです

※写真はCROS Pure Charge&Go Xです

補聴器を選ぶ前に

おすす

IX シグニアIX

Signia AX

IX AX用充電器

その他補聴器

アクセサリ：アプリ等

カラーバリエーション性能一覧

カラーバリエーション

製品のカラーは動画で
ご確認いただけます
※一部器種を除く



RIC型・耳かけ型

IX Signia IX シグニア IX **Signia AX**

スタイレット **Styletto IX**

スタイレット **Styletto AX**

表面質感

A: 全体がサラサラした触感のツヤ無し
B: ボディはサラサラした触感のツヤ無し
メタル部分はツルツルの鏡面仕上げ

ブラック/グラファイト	スノーホワイト/ローズゴールド	ブラック/シルバー	スノーホワイト/シルバー	コスミックブルー/ファインゴールド
B	A	A	A	A
Signia IXの7/5/3クラス、Signia AXの7/5/3クラス		Signia IXの全クラス、Signia AXの全クラス		7AX、5AX、3AXのみ

※実寸大

Stylettoは購入後のカラー変更はできません。

IX Signia IX シグニア IX **Signia AX**

ピュア チャージ&ゴー **Pure Charge&Go IX**

ピュア チャージ&ゴー **Pure Charge&Go AX**

ピュア **Pure 312 AX**

表面質感

A: 全体がサラサラした触感のツヤ無し
B: 全体がサラサラした触感とした鏡面仕上げ
C: ボディはサラサラした触感のツヤ無し
ボタン部分はツルツルの鏡面仕上げ

ベージュ	ブラック	パールホワイト	サンディブラウン	ダークシャンパン
C	C	A	A	A
ディーブラウン		ローズゴールド	シルバーヒーロー	グラファイト
C	A	A	B	A

※実寸大

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です。 ※写真はPure Charge&Go IXです

Signia Xperience

	ベージュ	グラナイト	グレー	ブラック	サンディブラウン	シルバーヒーロー
モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go X						
モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go PX						
モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go SPX						

※写真はMotion Charge&Go Xです

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です。

※写真はMotion Charge&Go Xです

primax

	ベージュ	グラナイト	グレー	ブラック	ダークグラナイト	ティープブラウン
2025年9月末販売終了予定						
モーション Motion SP						

Motion SPは購入後のカラー変更はできません。

既製耳あな型

IX Signia IX シグニア IX

	フェイスプレート	シェル
シルク チャージ&ゴー Silk Charge&Go IX	ブラック 	モカ 左:スケルトンブルー 右:スケルトンレッド

Signia Xperience

	フェイスプレート	シェル
2025年9月末販売終了予定	ブラック 	左:スケルトンブルー 右:スケルトンレッド

Silkは購入後のカラー変更はできません。

オーダーメイド耳あな型



Signia AX

	フェイスプレート・シェル同色
インシオ チャージ&ゴー Insio Charge&Go AX	ブラック
	ベージュ

IX Signia IX シグニア IX

	フェイスプレート	シェル
IIC	ブラック 	モカ スケルトンレッド スケルトンブルー
CIC	ブラック 	モカ スケルトンレッド スケルトンブルー ベージュ
インシオ Insio IX	ITC ブラック 	スケルトンレッド スケルトンブルー
ITC TWIN	ベージュ 	スケルトンレッド スケルトンブルー
ITE TWIN	ベージュ 	スケルトンレッド スケルトンブルー ブラック

※写真はInsio IX ITCです

その他のオーダーメイド耳あな型

	フェイスプレート						シェル								
Signia Nx	ベージュ	モカ	ブラック	primax	ベージュ	モカ	ブラック	Intuis3	ベージュ	モカ	ブラック	シェルカラーはSignia Nx、primax、Intuis3の3シリーズ共通			
IIC	—	—		CIC	—			CIC	—		—				
CIC	—		—	MC	—		—	CIC 312		—	—				
COOL		—		MC 312		—	—	MC	—		—				
ITC		—	—	COOL		—		MC 312		—	—				
ITC TWIN		—	—	COOL I3		—	—	ITC		—	—				
ITE TWIN		—	—	ITC/ITC TWIN		—	—	ITE		—	—				
				ITE/ITE TWIN		—	—								

* 2px、1pxは選択不可(モカのみ)

補聴器を選ぶ前に

おすす

IX シグニア IX

Signia AX

IX AX用 充電器

その他 補聴器

アクセサリ：アプリ等

性能一覧 カラーバリエーション

性能一覧 RIC型・耳かけ型

※このデータはJIS C 5512:2015(2cmカブラで測定)で表示しています
 ※仕様は予告なく変更される場合があります ※数値は代表的な仕様によるものです

形式		性能				誘導コイル感度 (dB) HFA-MASL (±6dB以内)	プログラム	リモコン・アプリ ^{*2}	適応聴力 (平均dBまで)	使用電池	電池寿命 (連続使用) (h) ^{*3}
シリーズ	タイプ	最大音響利得 (dB)		90dB入力最大出力音圧 レベル (dB)							
		HFA-FOG (±5dB以内)	最大値 (+3dB以下)	HFA-OSPL90 (±4dB以内)	最大値 (+3dB以下)						
Styletto IX(S/M/P)		38 / 51 / 61	46 / 60 / 65	102 / 115 / 120	110 / 119 / 122	—	 Signia Experience Signia Nxt primax の7/5/3クラスの プログラム数は6 Signia AX Signia Experience Signia Nxt primax の2/1クラス、 Intuis4、Intuis3、 Prompt、Fun のプログラム数は4	mP、app	60 / 75 / 90		約20
Pure IX	Pure Charge&Go IX(S/M/P/HP)	38 / 51 / 61 / 69	46 / 60 / 65 / 75	102 / 115 / 120 / 124	110 / 119 / 122 / 131	—		本体、mP、app	60 / 75 / 90 / 100		約28
Styletto AX(S/M/P)		38 / 51 / 61	46 / 60 / 65	102 / 115 / 120	110 / 119 / 122	—		mP、app	60 / 75 / 90		約20
Pure AX	Pure Charge&Go AX(S/M/P/HP)	38 / 51 / 61 / 69	46 / 60 / 65 / 75	102 / 115 / 120 / 124	110 / 119 / 122 / 131	—		本体、mP、app	60 / 75 / 90 / 100		約28
	Pure 312 AX(S/M/P/HP)	38 / 51 / 59 / 67	46 / 58 / 63 / 74	102 / 114 / 118 / 122	109 / 117 / 120 / 128	—		本体、mP、app	60 / 75 / 90 / 100		約90~105
Motion X	Motion Charge&Go X	53(50)*1	60(60)*1	125(116)*1	133(125)*1	—		本体、mP、app	90(70)*1		約24
	Motion Charge&Go P X	71(56)*1	77(66)*1	130(117)*1	135(130)*1	100(85)*1		本体、mP、app	100(80)*1		約30
	Motion Charge&Go SP X	74	82	133	140	104		本体、mP、app	110		約61
Motion px	Motion SP px	72	82	130	140	100		本体、SC、SR、mP、app	110		約300
Intuis4	Intuis4 M	53(51)*1	60(61)*1	124(116)*1	133(125)*1	82(76)*1		本体、mP、app	90(70)*1		約160
	Intuis4 P	71(57)*1	77(66)*1	130(118)*1	135(129)*1	101(86)*1		本体、mP、app	100(80)*1		約135
	Intuis4 SP	74	82	132	140	103		本体、mP、app	110		約285
Intuis3	Intuis3 RIC(S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	102 / 114 / 120 / 124	108 / 119 / 124 / 130	68 / 80 / 91 / 99		本体、mP、app	60 / 75 / 90 / 100		約140~175
	Intuis3 S	42(41)*1	55(45)*1	121(113)*1	124(124)*1	—		mP、app	65(50)*1		約175
	Intuis3 M	53(46)*1	60(53)*1	126(116)*1	130(125)*1	82(74)*1		本体、mP、app	85(65)*1		約260
	Intuis3 P	64	70	127	134	93		本体、mP、app	100		約190
	Intuis3 SP	72	80	133	140	102		本体、mP、app	110		約260
Prompt	Prompt S	42(41)*1	55(45)*1	121(113)*1	124(124)*1	—		mP、app	65(50)*1		約175
	Prompt P	64	70	127	134	93		本体、mP、app	100		約190
Fun	Fun P	64	70	126	132	—		本体	90		約220
	Fun SP	72	79	133	140	—	本体	110		約285	

*1 ()はLifeチューブ/Thinチューブでの数値です *2 右記の略名を記載しています。本体→補聴器本体にボリューム付き / SC→Smart Connect(販売終了) / SR→Smart Remote / mP→miniPocket / app→Signia appでボリューム調節可能 *3 電池寿命は使用状況によって変わります

オーダーメイド耳あな型のオプション

※オプションの詳細は「オーダーメイド補聴器ご注文の手引き」に記載

名前刻印



最大6文字カタカナを補聴器本体に刻印可能。

- 無料
- ※本体購入後の刻印は、修理扱い(¥8,800税込)

シェルグリップ



耳の中でずれにくくする加工。

- 対象器種: COOL, COOL 13を除く耳あな型
- 無料

カナルロック



耳から抜けないようにするためのストッパー。目立ちにくい透明色。

- 一部器種非対応
- 無料

テグス



補聴器を取り出しやすくするテグス有無、形状、長さ等選択可能。

- 無料

シェルマーキング



両耳装着の場合左右が分かりやすいようにシェルにマーク。

- 無料

ノンワイヤレス(小型優先)



両耳間で通信する「ワイヤレス機能」をなくすことで小型化。

- 対象器種: 下記の一覧表をご確認ください
- 無料

アクアプロテクト



汗・水に強いIP57対応。

- 対象器種: 7px/5px/3pxシリーズ(CIC, CIC 312除く)
- ¥6,000/台(非課税)

性能一覧 耳あな型

※このデータはJIS C 5512:2015(2mlカプラで測定)で表示しています ※仕様は予告なく変更される場合があります ※各項目の数値はノーマルタイプ/パワータイプ/ハイパワータイプの順に記載。「-」はそのタイプ非対応です

形式			性能					プログラム	リモコン・アプリ ^{*1}	適応聴力 (平均dBまで)	使用電池	電池寿命 ^{*3} (連続使用)(h)
シリーズ	タイプ	マイク	最大音響利得 (dB)		90dB入力最大出力音圧レベル (dB)		誘導コイル感度 (dB)					
			HFA-FOG (±5dB以内)	最大値 (+3dB以下)	HFA-OSPL90 (±4dB以内)	最大値 (+3dB以下)	HFA-MASL (±6dB以内)					
Silk Charge&Go IX	既製耳あな型	シングル	45 / - / -	50 / - / -	108 / - / -	114 / - / -	-	mP.app	70 / - / -	充電	約28	
Insio IX	IIC	シングル	44 / - / -	50 / - / -	108 / - / -	113 / - / -	-	mP.app	70 / - / -	10A	約90	
			CIC	45 / 50 / 57	50 / 55 / 60	107 / 109 / 118	113 / 118 / 124	-	本体, mP.app	70 / 80 / 90	10A	約90
			ITC	46 / 50 / 55	50 / 55 / 60	109 / 112 / 118	113 / 118 / 124	-	mP.app	70 / 80 / 90	312	約145
			ITE TWIN	45 / 48 / 55	50 / 55 / 60	108 / 112 / 119	113 / 118 / 124	-	mP.app	70 / 80 / 90	312	約145
	ITE TWIN	- / 49 / 56	- / 55 / 60	- / 112 / 118	- / 118 / 124	- / 79 / 86	-	mP.app	- / 80 / 90	312	約145	
Insio Charge&Go AX	ワイヤレス充電ITC	ツイン	46 / 44 / 60	50 / 55 / 65	109 / 109 / 119	113 / 118 / 124	-	本体, mP.app	70 / 80 / 90	充電	約28	
	ワイヤレス充電ITE	- / 47 / 60	- / 55 / 65	- / 109 / 120	- / 118 / 124	-	本体, mP.app	- / 80 / 90	充電	約28		
Silk X	既製耳あな型	シングル	45 / - / -	50 / - / -	108 / - / -	114 / - / -	-	mP.app	70 / - / -	10A	約75	
Insio Nx	IIC	シングル	46 / - / -	50 / - / -	109 / - / -	113 / - / -	-	mP.app	70 / - / -	10A	約70	
			CIC	45 / 48 / 59	50 / 55 / 65	108 / 112 / 119	113 / 118 / 124	-	mP.app	70 / 80 / 90	10A	約70
			COOL	45 / 47 / -	50 / 55 / -	108 / 111 / -	113 / 118 / -	65 / 79 / -	mP.app	70 / 80 / -	312	約120
			ITC	45 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 111 / 119	113 / 118 / 124	65 / 79 / 91	mP.app	70 / 80 / 90	312	約120
	ITC TWIN	ツイン	ITC TWIN BT有り	45 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 111 / 119	113 / 118 / 124	65 / 79 / 91	mP.app	70 / 80 / 90	312	約120
			ITE TWIN	- / 48 / 60	- / 55 / 65	- / 112 / 119	- / 118 / 124	- / 79 / 90	mP.app	- / 80 / 90	312	約120
			ITE TWIN BT有り	- / 48 / 60	- / 55 / 65	- / 112 / 119	- / 118 / 124	-	mP.app	- / 80 / 90	312	約120
			CIC	45 / - / -	50 / - / -	109 / - / -	113 / - / -	-	mP.app	70 / - / -	10A	約80
			CIC 312	44 / - / -	50 / - / -	108 / - / -	113 / - / -	-	mP.app	70 / - / -	312	約145
Insio px	MC	シングル	45 / 48 / 60	50 / 55 / 65	109 / 112 / 119	113 / 118 / 124	-	SC, SR, mP.app	70 / 80 / 90	10A	約80	
			MC 312	44 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 112 / 120	113 / 118 / 124	-	SC, SR, mP.app	70 / 80 / 90	312	約145
			COOL	44 / 47 / -	50 / 55 / -	108 / 112 / -	113 / 118 / -	-	SC, SR, mP.app	70 / 80 / -	312	約145
			COOL 13	- / 48 / -	- / 55 / -	- / 113 / -	- / 118 / -	-	SC, SR, mP.app	- / 80 / -	13	約240
	ITC	ツイン	ITC	44 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 112 / 120	113 / 118 / 124	-	SC, SR, mP.app	70 / 80 / 90	312	約145
			ITE	- / 48 / 60	- / 55 / 65	- / 113 / 120	- / 118 / 124	- / 78 / 89	SC, SR, mP.app	- / 80 / 90	13	約240
			ITC TWIN	44 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 112 / 120	113 / 118 / 124	-	SC, SR, mP.app	70 / 80 / 90	312	約145
			ITE TWIN	- / 48 / 60	- / 55 / 65	- / 113 / 120	- / 118 / 124	- / 78 / 89	SC, SR, mP.app	- / 80 / 90	13	約240
			CIC	45 / - / -	50 / - / -	109 / - / -	113 / - / -	-	mP.app	70 / - / -	10A	約80
Intuis3	シングル	CIC 312	44 / - / -	50 / - / -	108 / - / -	113 / - / -	-	mP.app	70 / - / -	312	約145	
		MC	45 / 48 / 60	50 / 55 / 65	109 / 112 / 119	113 / 118 / 124	-	mP.app	70 / 80 / 90	10A	約80	
		MC 312	44 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 112 / 120	113 / 118 / 124	-	mP.app	70 / 80 / 90	312	約145	
		ITC	44 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 112 / 120	113 / 118 / 124	-	mP.app	70 / 80 / 90	312	約145	
		ITE	- / 48 / 60	- / 55 / 65	- / 113 / 120	- / 118 / 124	- / 78 / 89	mP.app	- / 80 / 90	13	約240	
		ITE	- / 48 / 60	- / 55 / 65	- / 113 / 120	- / 118 / 124	- / 78 / 89	mP.app	- / 80 / 90	13	約240	

IX Signia K シグニアK
 Signia Xperience
 Signia Nx
 primax
 の7/5/3クラスのプログラム数は6

IX Signia K シグニアK
 Signia Xperience
 Signia Nx
 primax
 の2/1クラスのプログラム数は4

オプション一覧(無料)

シリーズ	タイプ	環境スイッチ (メモリー)	ポリウム コントロール ^{*A}	テレコイル ^{*A}	オートフォン ^{*A}	ノンワイヤレス
Insio IX	IIC	-	-	-	-	選択可
	CIC	標準装備 ^{*B}	-	-	-	選択可
	ITC	選択可	選択可 ^{*1}	-	-	選択可
	ITC TWIN	選択可	選択可 ^{*1}	-	-	選択可
	ITE TWIN	選択可	選択可 ^{*1}	選択可 ^{*F}	-	選択可
	ITE TWIN BT有り	標準装備	-	-	-	-
Insio Charge&Go AX	ワイヤレス充電ITC	標準装備	-	-	-	-
	ワイヤレス充電ITE	標準装備	-	-	-	-
	IIC	-	-	-	-	-
	CIC	標準装備 ^{*B}	-	-	-	選択可
	COOL	選択可 ^{*C}	選択可 ^{*C-1}	選択可 ^{*F}	-	選択可
	ITC	選択可	選択可 ^{*1}	-	-	選択可
	ITC TWIN	標準装備	-	-	-	-
	ITC TWIN BT有り	標準装備	-	-	-	-
	ITE TWIN	選択可	選択可 ^{*1}	選択可 ^{*F}	-	選択可
	ITE TWIN BT有り	標準装備	-	-	-	-
Insio px	CIC / CIC 312	-	-	-	-	標準装備
	MC / MC 312	選択可	-	-	-	選択可
	ITC / ITC TWIN	選択可	選択可 ^{*D}	-	-	選択可
	ITE / ITE TWIN	選択可	選択可 ^{*D}	選択可 ^{*F}	選択可 ^{*G-H}	選択可
	COOL / COOL 13	選択可 ^{*C}	選択可 ^{*C-D}	-	選択可 ^{*G-H}	選択可
	CIC / CIC 312	-	-	-	-	標準装備
Intuis3	MC / MC 312	標準装備	-	-	-	標準装備
	ITC	選択可	選択可 ^{*E}	-	-	標準装備
	ITE	選択可	選択可 ^{*E}	選択可 ^{*F}	-	標準装備

*A テレコイルとポリウムコントロールは、オートフォンとの同時取り付けはできません
 *B バッテリーロッカーが環境スイッチを兼ねます
 *C 補聴器1台に、環境スイッチとポリウムコントロールの同時取り付けはできません。両耳装着の場合、左右別々に付けることは可能です。
 *D ワイヤレスはデジタルポリウム(エンドレス)、ノンワイヤレスはアナログポリウム(ストップエンド)になります
 *E アナログポリウム(ストップエンド)になります
 *F リモコンまたはアプリ無しでテレコイルを使用する場合は、同時に環境スイッチ(メモリー)も必要です
 *G ツインフォン機能を利用する場合、両耳にオートフォン、ワイヤレスが必要
 *H 2px, 1px は、取り付けできません
 *I ワイヤレス/ノンワイヤレスともにデジタルポリウム(エンドレス)のみになります

*1 右記の略名を記載しています。SC→Smart Connect(販売終了) / SR→Smart Remote / mP→miniPocket / app→Signia app *2 最大プログラム数:本体のプッシュボタンやリモコンアプリを利用した時に得られる最大プログラム数です *3 電池寿命は使用状況によって変わります

補聴器を選ぶ前に
 おすすめ
 Signia K シグニアK
 Signia Nx
 IX AX用
 充電器
 その他
 補聴器
 アクセサリー
 カラーバリエーション
 性能一覧

シグニア補聴器の安心保証とスマートリペア



+



① 保証期間内は無料で修理 補聴器本体に自然故障*が生じた場合

*取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合
 *紛失および過失による故障(シェル破損や水没など)は保証対象外です。修理可能な場合はスマートリペアの価格でご対応いたします(全損は対象外)
 *電池やイヤチップなどのアクセサリ類は、保証およびスマートリペアの対象外です

② さらに修理保証期間が過ぎた後も修理は定額のスマートリペア

*「スマートリペア」は入会金などの費用が一切からず、修理は定額
 *耳あな型のシェル再作、修正は別途費用がかかります
 *故障部位および購入年数によって各種規定があります

③ 購入後の無料再作(耳あな型オーダーメイド補聴器)

耳あな型オーダーメイド補聴器の形が耳に合わない場合、お買い上げの日から1年あるいは2年以内(機種によって異なる)の再作を無料でいたします(その他、詳しい保証規定は添付の保証書によります)

● 修理保証

	1年目	2年目	3年目	4年目以降～
Signia 7IX/5IX Signia 7AX/5AX Signia 7X/5X Signia 7Nx/5Nx	3年無料修理保証			スマートリペア定額修理期間
上記以外の シグニア補聴器	2年無料修理保証		スマートリペア定額修理期間	

● 紛失保証

	1年目	2年目
Signia 7IX/5IX Signia 7X/5X Signia 7AX/5AX Signia 7Nx/5Nx	2年保証 1回に限り無料	
Signia 3IX Signia 3X Signia 3AX 7px/5px	1年保証 1回に限り無料	

シバントス株式会社

〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7-10-1 三機大和ビル 6F

■ 個人のお客様専用窓口

「シグニア補聴器」お客様コールセンター
 ✉ sodan.jp@signia-hearing.com

Tel:0800-888-0303

Tel:046-289-0303 Fax:046-407-1133

※フリーコールはIP電話からはつながりません。
 その場合は通常の電話番号までお問い合わせください。

営業時間

9:00-12:00 13:00-17:00(土・日・祝日 定休日)

■ 販売店様専用問合せ窓口

カスタマーサービス
 ✉ cs.jp@signia-hearing.com

Tel:0800-222-4133 Fax:0800-888-4133

Tel:046-409-4133 Fax:046-407-1133

※フリーコールはIP電話からはつながりません。
 その場合は通常の電話番号までお問い合わせください。

営業時間9:00-17:00(日・祝日 定休日)

販促物注文専用Fax:050-3730-5795



個人のお客様向けサイト
www.signia.net/ja-jp/



SNS公式アカウント、メールマガジンの登録はこちら
www.signia.net/ja-jp/local/ja-jp/socialmedia-newsletter/



販売店様向けサイト
www.signia-pro.com/ja-jp/



シグニア補聴器のご相談・ご用命は当店へ

聞こえの詳細な検査は、耳鼻科専門医を受診してください。補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、着用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。このカタログと実際の製品の色・形状は、印刷等の関係で異なる場合があります。

カタログに表示されている価格は希望小売価格です。

医療機器製造販売業許可番号 14B2X00018 このカタログの内容は2025年5月時点のものです。価格や仕様は予告なく変更されることがあります。25.05.JP.17001453

AndroidとGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。Apple App StoreはApple Inc.の商標です。Qi(チー)はWireless Power Consortiumの登録商標です。Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有しており、これらのマークの使用は、ライセンス許諾されています。その他の商標・商品名に関する権利は、それぞれの所有者に帰属します。



6月6日は補聴器の日