

20000026386

MV 1 Holder 082019

IKA

Montageanleitung Assembly instructions Instructions d'assemblage

MV 1 Holder



Beachten Sie die Betriebsanleitung des LR1000 basic und LR 1000 control!

Observe the Operating instructions of the LR 1000 basic and control!

Veuillez respecter les instruction du mode d'emploi du LR 1000 basic et control!

Ursprungssprache

DE

Sicherheitshinweise

- Der Halter muss mit der Griffschraube handfest an der Stativstange befestigt sein. Achten Sie dabei darauf, dass die Stativstange aus der Halteröffnung herausragt. Prüfen Sie den fester Sitz in regelmäßigen Abständen.
- Achten Sie auf den richtigen Sitz der Halterung.
- Transportieren Sie den Laborreaktor nicht, wenn sich das Ventil in der Halterung befindet.

Source language: German

EN

Safety instructions

- Mount the holder to the support rod with the hand knob screw (hand-tight). Make sure that the top of the support rod looks out of the holder. Tight fit must be checked at regular intervals.
- Ensure correct fit of the holder.
- Do not transport unit while the valve is in the holder.


Langue d'origine: allemand

FR

Consignes de sécurité

- Le support doit être fixé à la main sur la tige de statif avec la vis à poignée. Veillez à ce que la tige de statif dépasse de l'ouverture du support. Contrôlez la bonne fixation à intervalles réguliers.
- Assurez-vous que le support est correctement ajusté.
- Ne transportez pas le réacteur de laboratoire si le valve se trouve dans le support.

Montage / Assembling / Assemblage

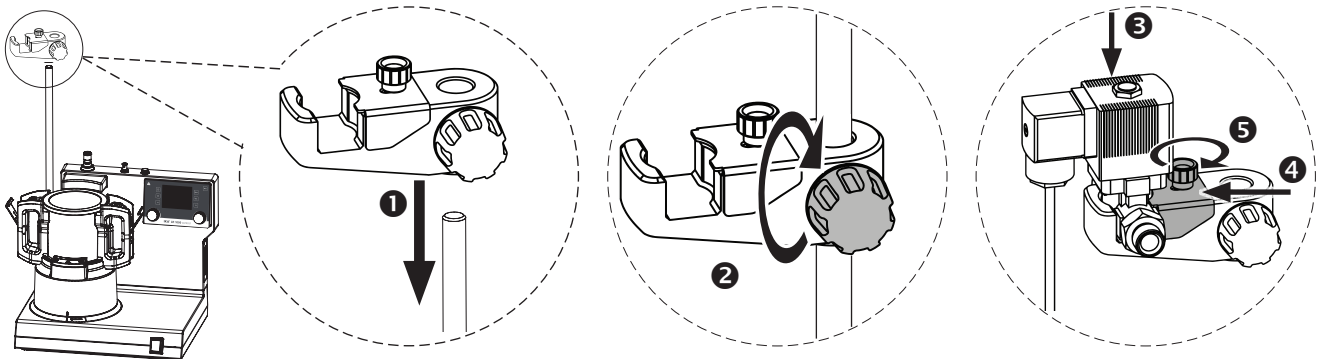

IKA-Werke GmbH & Co.KG

Janke & Kunkel-Str. 10


D-79219 Staufen

Tel. +49 7633 831-0

Fax +49 7633 831-98

sales@ika.de

www.ika.com

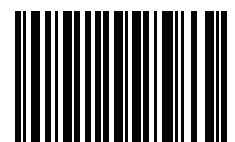

20022227